

IL farfallarampa™

Istruzioni per l'uso

Codici prodotto: DVBM, DVBL

Scopo previsto: Queste rampe sono destinate ad essere utilizzate come sedia a rotelle accessorio per consentire alle persone con disabilità di muoversi in aree di diverse altezze.

Prima dell'uso



- Rimuovere e conservare tutto l'imballaggio.
- Assicurarsi che la rampa non abbia subito danni durante il trasporto o lo stoccaggio.
- Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze prima di utilizzare la rampa. Conservare le istruzioni per riferimento.
- Assicurarsi che la superficie su entrambi i livelli sia solida, stabile e in grado di sopportare il carico previsto.

Per distribuire

1. Per trasportare la rampa, utilizzare l'apposito foro di trasporto con protezione per le dita.



2. Posizionare la rampa in modo da superare la soglia. La colonna vertebrale della rampa a farfalla deve poggiare saldamente e in piano sulla soglia.

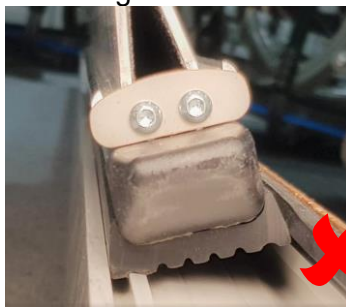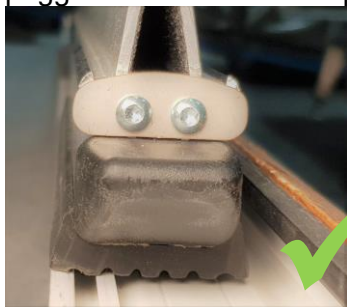

3. Le estremità Gripline di entrambi i lati della rampa devono poggiare saldamente sulla superficie piana.



4. La rampa a farfalla può attraversare in sicurezza la serratura per porte doppie

IL farfallarampa™

Istruzioni per l'uso

Codici prodotto: DVBM, DVBL



5. Assicurarsi che le rampe non si spostino durante l'uso. Verificare che le rampe siano saldamente posizionate e stabili ogni volta che vengono utilizzate. Prestare attenzione durante l'uso delle rampe, in modo che nessuna parte della sedia a rotelle possa impigliarsi e spostare le rampe.

Manutenzione

- Se la rampa risulta danneggiata o scivolosa in qualsiasi modo, non utilizzarla (contattare il fornitore/produttore).
- La rampa può essere pulita con normali prodotti per la pulizia e lasciata asciugare prima dell'uso.
- Temperatura massima di pulizia consigliata 50°C; per maggiori dettagli sull'uso con macchine per la pulizia industriale, si prega di chiedere.

Riciclaggio

- Se non hai più bisogno di questo prodotto e ti è stato fornito in prestito dall'autorità locale o da un ente di beneficenza, contatta il servizio che te l'ha prestato e concorda la restituzione/rimozione dalla tua proprietà. Se si tratta di un prodotto di tua proprietà e desideri smaltirlo, contatta un servizio di riciclaggio locale.
- Tutti i materiali delle rampe sono riciclabili al 100%. Staccare tutti i dettagli in gomma e inviare le parti in alluminio al riciclaggio dei metalli.

Garanzia

- La rampa è coperta da una garanzia completa di 2 anni per un utilizzo normale, salvo diverse condizioni.
- Un utilizzo diverso da quello pubblicato/previsto invaliderà la garanzia.
- Le rampe non sono progettate per un uso esterno permanente e non devono essere fissate.
- Qualsiasi modifica/riparazione non effettuata dal produttore invaliderà la garanzia.



IL farfallarampa™

Istruzioni per l'uso

Codici prodotto: DVBM, DVBL

Informazioni chiave sul prodotto

Codice	Intervallo di altezza	Larghezza	Capacità	Peso	Dimensioni immagazzinate L x A x P
DVBM	0cm -10cm più (da 0 a 4 pollici in su)	70 cm (28 pollici)	350 kg (55 st)	6,8 kg (15 libbre)	70 x 48 x 4 cm (28 x 19 x 1,5 pollici)
DVBL	0 cm – 15 cm più (da 0 a 15 cm in su)	70 cm (28 pollici)	350 kg (55 st)	9,1 kg (20 libbre)	70 x 63 x 4 cm (28 x 25 x 1,5 pollici)