

NEW Aerolight-Classic

Istruzioni per l'uso

Codici dei prodotti: AC6, AC9, AC12, AC15


Scopo previsto: Queste rampe sono destinate ad essere utilizzate come accessorio per sedie a rotelle per persone con disabilità per navigare in aree di diverse altezze.

Prima del l'uso

- Rimuovere tutti gli imballaggi e assicurarsi che le rampe non siano state danneggiate durante il trasporto. Conservare l'imballaggio.
- Leggere attentamente le istruzioni e i testi di avvertimento prima di utilizzare le rampe
- Tenere le istruzioni per riferimento
- Su ogni rampa troverete un'etichetta che mostra il carico massimo consentito per la rampa.

Per distribuire

1. Trasportare la rampa utilizzando la maniglia.
2. Assicurarsi che il terreno/la superficie sia al livello superiore e inferiore sia solido e stabile.
3. La rampa di controllo è sufficientemente lunga da coprire il gradino/la salita. Le rampe sono progettate per l'uso tra 1:4 e 1:20 gradiente (a seconda di applicazione sicura e requisiti di utilizzo).
4. Mettere la rampa in posizione con il labbro completamente sul livello superiore, centrale al percorso scelto (pic. A). Il design unico delle estremità mantiene la rampa in posizione.
5. Assicurarsi che le rampe non si sfalsino durante l'uso. Verificare che la rampa sia ben posizionata e stabile ogni volta che viene utilizzata.

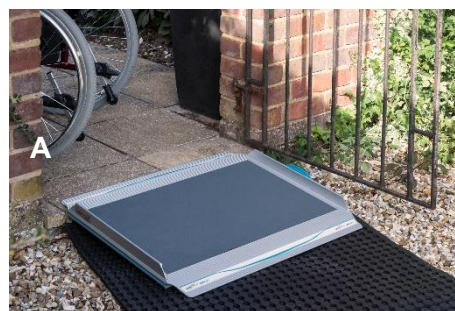

Manutenzione

- Se le rampe diventano danneggiate o scivolose in qualsiasi modo non devono essere utilizzate (contattare il fornitore/ produttore).
- Le rampe possono essere pulite con i normali prodotti per la pulizia.
- Temperatura di pulizia massima raccomandata 50 °C, si prega di informarsi per ulteriori dettagli sull'uso con macchine per la pulizia industriale
- Per lo smaltimento di questi prodotti, si prega di mettersi in contatto con un appaltatore del riciclaggio dei metalli

Garanzia

- Le nuove rampe Aerolight sono progettate e ottimizzate per l'uso da disabili/portatori di handicap
- Le rampe hanno una garanzia completa di 2 anni per l'uso normale, si applicano le condizioni.
- Un uso diverso da quello pubblicato/previsto annullerà la garanzia.
- Le rampe non sono progettate per l'uso permanente all'aperto e non devono essere fissate a terra.
- Qualsiasi modifica/ riparazione diversa dal produttore annullerà la garanzia.
- Le rampe non saranno riparate/sostituite se la targa del numero di serie è stata rimossa/sostituita.



Accessori disponibili (contattare il fornitore/ produttore per ordinare)

- Cono di avvertimento AWC

NEW Aerolight-Classic

Istruzioni per l'uso

Codici dei prodotti: AC6, AC9, AC12, AC15

- Kit di cinghie da parete AWK
- Kit portaoggetti orizzontale ASB

Code	Length	Ramp Width*	Lip Width	Capacity	Weight
AC6	60cm (2')	76cm (30")	71.4cm (28.1")	400kg (63st)	4.2kg (9lbs)
AC9	90cm (3')	76cm (30")	71.4cm (28.1")	350kg (55st)	5.4kg (12lbs)
AC12	120cm (4')	76cm (30")	71.4cm (28.1")	350kg (55st)	6.8kg (15lbs)
AC15	150cm (5')	76cm (30")	71.4cm (28.1")	350kg (55st)	8.2kg (18lbs)

* Width excludes handles


Pendenza/pend

- 1:6 (10')** Acceptable in some cases for assisted access and powered wheelchairs.
- 1:8 (8')** A good balance between gradient and space use, suited for events etc.
- 1:12 (5')** Often required by social services/local authorities. Minimum required Building Regs Doc M for installed ramps.
- 1:15 (4')** Sometimes required by social services/local authorities for independent access.

- Altri prodotti disponibili includono piattaforme leggere, supporti di giunzione rampa e kit corrimano

Lunghezza

(Total height of steps or height to resting point on vehicle).

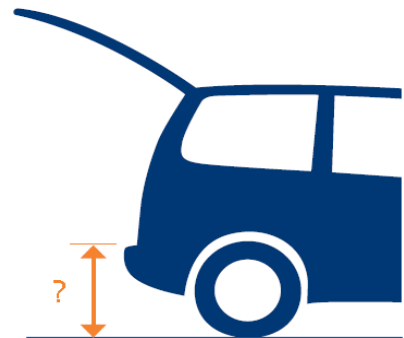

- b. Use the Ramp Length Guide to decide which length you need.

Ramp Length Guide

Step height/level difference (up to)	Length at 1:6	Length at 1:8	Length at 1:12
10cm (4")	60cm (2')	80cm (2' 7")	120cm (3' 11")
15cm (6")	90cm (2' 11")	120cm (3' 11")	180cm (5' 11")
20cm (8")	120cm (3' 11")	160cm (5' 3")	240cm (7' 10")
25cm (10")	150cm (4' 11")	200cm (6' 7")	300cm (9' 10")
30cm (1')	180cm (5' 11")	240cm (7' 10")	360cm (11' 10")
45cm (1' 6")	270cm (8' 10")	360cm (11' 10")	540cm (17' 9")
60cm (2')	360cm (11' 10")	480cm (15' 9")	720cm (23' 7")