

Ropox ErgoMultitable

Instructions de montage

Manuel de l'utilisateur

Conservez ce manuel avec le produit à tout moment

Sommaire

1. Données techniques	3
2. Présentation	4
3. Conformité avec la directive européenne	4
4. Application.....	4
5. Liste des composants.....	5
6. Instructions de montage.....	7
7. Montage du système boomerang	8
8. Réglage de la hauteur de la table	9
9. Test de performance	10
10. Sécurité d'utilisation.....	10
11. Nettoyage/ entretien.....	11
11.1 Nettoyage du cadre.....	11
11.2 Nettoyage du plateau, du stratifié	11
11.3 Maintenance	11
12. Recherche de pannes	12
12.1 La table semble mal fixée ou instable.....	12
12.2 La hauteur/l'inclinaison ne peut pas être réglée (le réglage est très difficile).....	12
13. Réclamation.....	13

1. Données techniques

Nom du produit :	Ropox ErgoMultitable Dimensions du plateau : 90x70 cm
Numéros d'articles :	20-70410
Réglage de la hauteur :	56-90 cm (manuel) y compris le plateau et les roues freins
Matière :	Acier 37 Divers composants en plastique
Plateau :	Stratifié
Traitement de surface :	Revêtement en poudre Chromate
Charge maximale sur le cadre (statique) :	100 kg répartis uniformément sur le plateau
Puissance de levage Maximale pendant le réglage de la hauteur (dynamic):	50 kg
Réclamation :	Voir la réclamation
Fabricant	Ropox A/S, DK-4700 Næstved, tél : +45 55 75 05 00 e-mail : info@ropox.dk , www.ropox.com

2. Présentation

ErgoMultitable est le nom de la nouvelle table réglable en hauteur de Ropox.



Ce manuel doit TOUJOURS accompagner le produit, être lu par l'utilisateur et être à sa disposition.

Une utilisation, un fonctionnement et une inspection corrects sont des facteurs décisifs pour une performance efficace et sûre.



Ce produit est réglable en hauteur et présente donc un risque d'écrasement. Le réglage de la hauteur doit être effectué par ou sous la surveillance d'un adulte qui a lu et compris l'importance de la section : "Sécurité d'utilisation"

Lors de l'utilisation de la fonction de basculement (abaissement du plateau), il existe un risque de coincement entre le plateau et le cadre. Il est donc important de veiller à ce qu'aucune partie du corps ou aucun objet ne se trouve entre le plateau et le cadre.

3. Conformité avec la directive européenne

Ce produit porte le marquage CE et est donc conforme aux exigences fondamentales en matière de fonctionnalité et de sécurité de la directive européenne en vigueur. Voir la déclaration CE séparée.

4. Application

ErgoMultitable est conçu pour obtenir une hauteur de travail optimale pour l'utilisateur. Il s'agit d'une table d'activité qui ne doit pas être utilisée comme table élévatrice ou comme lève-personne.

La table est destinée à être utilisée à l'intérieur, dans des conditions normales de température et d'humidité.

5. Liste des composants

Piètement 1 (une)

Numéro d'article 90cm : 20*70000-032



Pied 2 (deux)

Monté avec des roues de freinage

Numéro d'article : 20*70000-026



Plateau 1 (un)

Fourni avec des supports et des vis papillon

Numéro d'article : 60102392




Boulon M6x25 95060625 : _____ 8 (huit)



Ecrou M6 95180006 : 6 (six)



Boomerang R=20cm 60101184 : 1 pce.

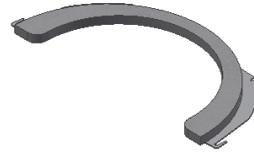

Boomerang R=15cm 60101186 : 1 pce.



Boomerang sans découpe 60101591 : 1 pce.



Poignée 20-60320-297 : 1 (un)




Tournevis supérieur 95000057 + 95000058: 1 (un)




6. Instructions de montage

1. Montage du plateau

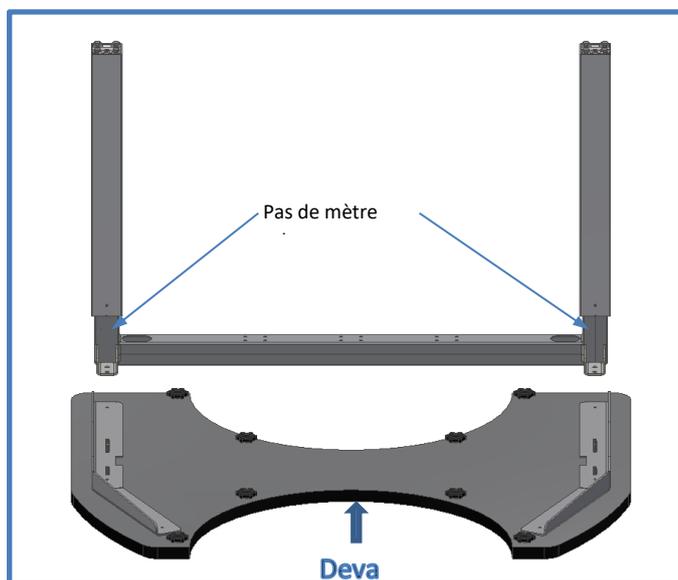

Noter que le ruban à mesurer est placé contre le bord arrière.

2. Montage des pieds

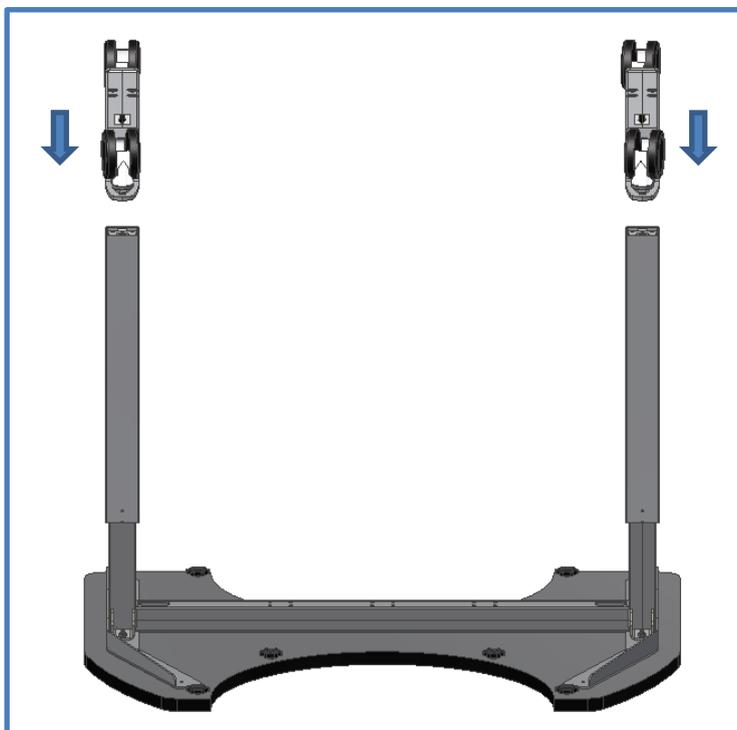

Les flèches des pieds doivent être orientées vers le devant de la table.

7. Montage du système boomerang




Pousser le boomerang dans la section découpée du plateau. Serrer les 4 vis papillon situées dans le plateau.




8. Réglage de la hauteur de la table

1. Montage de la poignée

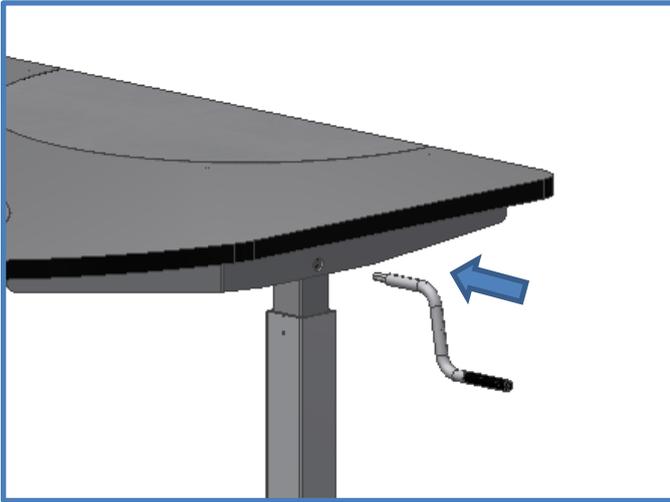

La hauteur est réglée manuellement en tournant la poignée située sur le côté de la table. En tournant la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, du côté droit de la table, la table se déplace vers le haut.

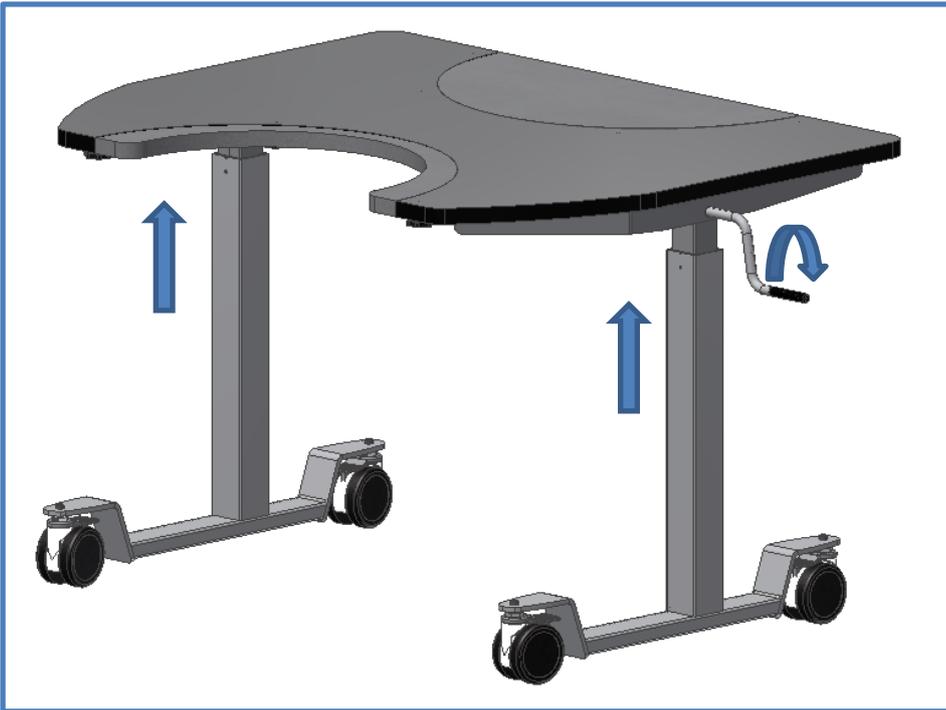

9. Test de performance

Une fois l'installation terminée et avant l'utilisation, toutes les fonctions du plateau doivent être testées. Ensuite, un test de performance doit être effectué au moins une fois par an par du personnel compétent.

1. Vérifier que les instructions de montage ont été respectées.
2. Vérifier que tous les boulons ont été serrés.
3. Assurez-vous qu'il n'y a pas de charge sur la table.
4. Veillez à ce qu'aucun objet ou autre n'empêche la table de se déplacer librement dans la plage de réglage en hauteur.
5. Placez la manivelle comme illustré dans le manuel et réglez la table en position basse. Vérifier que le mouvement est régulier et sans à-coups.
6. Ajustez maintenant la table en position haute et vérifiez que le mouvement est régulier et sans à-coups.

Lorsque ces tests ont été effectués avec succès, la table est prête à être utilisée. Voir "Sécurité d'utilisation", section 10.

10. Sécurité d'utilisation

- ErgoMultitable ne doit être utilisé que par des personnes qui ont lu et compris ces instructions.
- ErgoMultitable est une table d'activités et ne doit pas être utilisée comme table élévatrice ou comme lève-personne.
- Vérifiez toujours que les inserts de la table sont montés correctement et solidement avant d'utiliser le produit.
- Si la table est équipée de roulettes, il est recommandé de toujours verrouiller les roulettes lorsque la table n'est pas déplacée. Ceci afin d'éviter tout risque lié à un mouvement involontaire de la table.
- Utilisez toujours la table de manière à exclure tout risque de dommage aux personnes ou aux biens. La personne qui utilise la table est responsable d'éviter tout dommage ou blessure.
- Veillez à ce qu'il y ait un espace libre au-dessus et au-dessous de la table pour permettre le réglage de la hauteur.
- Ne pas utiliser la table en cas de défauts ou de dommages.
- Ne surchargez pas la table et veillez à ce que la répartition de la charge soit correcte.
- Pendant les inspections, l'entretien ou les réparations, toute charge doit être retirée de la table.
- Les modifications susceptibles d'influer sur les performances ou la conception de la table ne sont pas autorisées.
- L'assemblage, l'entretien et les réparations doivent être effectués par du personnel compétent.
- Si la table n'a pas été montée conformément à ces instructions de montage, la garantie peut être annulée.
- N'utilisez que des pièces de rechange d'origine Ropox pour le remplacement. L'utilisation d'autres pièces de rechange peut entraîner l'annulation de la garantie.

11. Nettoyage/ entretien

11.1 Nettoyage du cadre

Séchez le cadre à l'aide d'un chiffon essoré avec de l'eau tiède et un détergent doux. Ne pas utiliser Raviveurs ou abrasifs ou chiffons, brosses ou éponges abrasives.

Après le nettoyage, sécher le cadre.

11.2 Nettoyage du plateau, du stratifié

Nettoyez le plateau stratifié à l'aide d'un chiffon doux essoré dans de l'eau chaude additionnée d'un détergent liquide, non sulfoné, car il en résulterait une surface grasse. Les taches qui ne peuvent être éliminées avec de l'eau peuvent souvent l'être avec des proportions égales de chlore et d'eau ou avec de l'acétone. Lorsque vous utilisez ces produits, veillez à aérer la pièce et assurez-vous que le cadre n'entre pas en contact avec ces produits de nettoyage.

Les taches de feutres peuvent être éliminées à l'aide d'alcool dénaturé ordinaire. Les traits de crayon doivent être effacés à l'aide d'une gomme. Certains produits chimiques, l'encre et les jus de fruits fortement colorés peuvent, s'ils sont laissés sur le plateau pendant une période prolongée, entraîner une décoloration car les pigments de couleur adhèrent à la surface.

Ne jamais utiliser de laine d'acier, de poudre à récurer ou de produits de nettoyage qui laissent un film sur la surface, par exemple du savon jaune.

Après le nettoyage, il est recommandé de laver la surface avec un chiffon essoré à l'eau claire et de la sécher avec un chiffon doux.

11.3 Maintenance



Les inspections, l'entretien et les réparations doivent être effectués par du personnel compétent

Le cadre ne nécessite aucun entretien et les pièces mobiles sont lubrifiées à vie. Pour des raisons de sécurité et de fiabilité, nous recommandons d'inspecter le cadre une fois par an :

- Vérifier que tous les boulons sont bien fixés.
- Vérifiez que la table se déplace sans problème de la position inférieure à la position supérieure.

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine Ropox pour le remplacement. L'utilisation d'autres pièces de rechange peut entraîner l'annulation de la garantie.

12. Recherche de pannes

12.1 La table semble mal fixée ou instable

- Les vis d'assemblage n'ont pas été correctement serrées.
- Resserrer toutes les vis, cf. instructions de montage.

12.2 La hauteur/l'inclinaison ne peut pas être réglée (le réglage est très difficile)

- Vérifier qu'il n'y a pas de charge sur la table.
- Vérifiez que la table n'est pas surchargée ou endommagée.

13. Réclamation

Voir les conditions générales de vente et de livraison sur www.ropox.com

ROPOX A/S

Ringstedgade 221

DK-4700 Næstved

Tél : +45 55 75 05 00

Courriel : info@ropox.dk

www.ropox.dk