




# Power Wheels

PER:

700E & 600ES

Manuale n. 105765

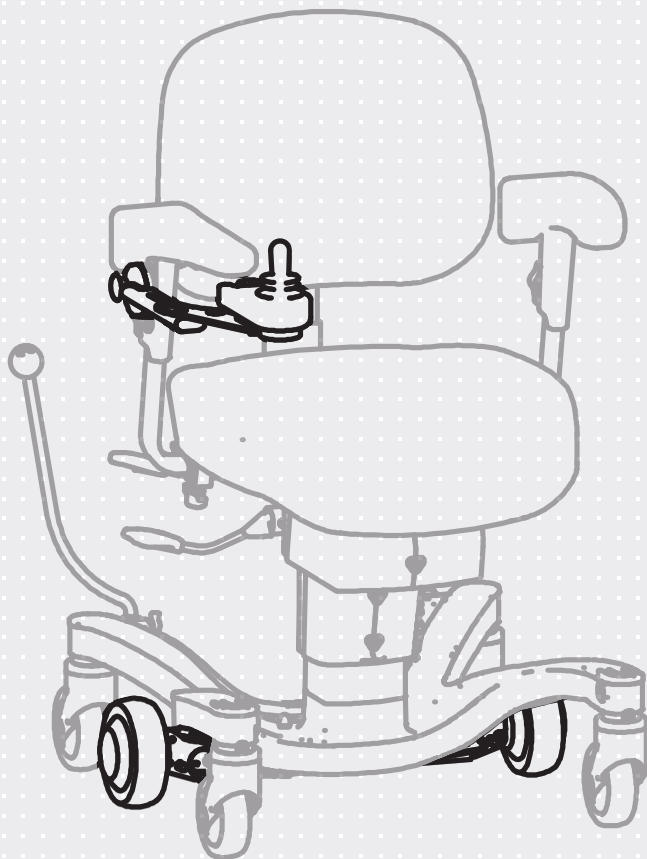

ISO 9001  
ISO 14001

## INDICE

<b>1.0. INTRODUZIONE</b>	<b>3</b>
<b>1.1. AVVERTENZE</b>	<b>4</b>
<b>1.2. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI</b>	<b>5</b>
<b>1.3. USO PREVISTO</b>	<b>6</b>
1.3.1. I seguenti fattori possono influenzare la capacità della batteria	6
1.3.2. Controindicazioni	6
<b>1.4. IMPOSTAZIONI</b>	<b>8</b>
1.4.1. Accendere/spegnere il sistema di guida	8
1.4.2. Sterzata	8
1.4.3. Controllo della velocità	8
1.4.4. Joystick pieghevole	8
1.4.5. Limitazione dell'altezza	9
1.4.6. Indicatore della batteria	9
1.4.7. Ruote ribaltabili	9
1.4.8. Frenata	9
1.4.9. Regolazione del joystick	10
1.4.10. Ricarica	10

## 1.0. INTRODUZIONE

### GENTILE CLIENTE

Congratulazioni per il tuo nuovo accessorio di assistenza alla guida di VELA.

Questo prodotto non è di per sé un dispositivo medico, ma un accessorio per le sedie VELA Tango 700E e VELA Tango 600ES. Si prega di consultare il manuale utente del VELA Tango 700E o VELA Tango 600ES per l'uso previsto e altre informazioni.

Questo documento serve come supplemento al manuale utente fornito con le sedie VELA Tango 700E e VELA Tango 600ES.

#### **Importante**

Si prega di leggere attentamente questo manuale utente e di conservarlo in un luogo sicuro per eventuali riferimenti futuri. Questo manuale è disponibile anche sul sito web di VELA: [www.vela.eu](http://www.vela.eu), dove puoi trovare anche altre informazioni rilevanti.

Se hai domande, riscontri errori o eventi avversi, contatta il tuo fornitore VELA.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

#### **VELA**

Gøteborgevej 8-12  
DK-9200 Aalborg SV  
Danimarca  
[www.vela.eu](http://www.vela.eu)

## 1.1. AVVERTENZE



Quando montata, la sedia è più stabile in direzione e non può muoversi lateralmente.

Uso	Non utilizzare il sistema di guida mentre il freno è inserito.
Uso	Non utilizzare il sistema di guida se le ruote motrici non sono a contatto con il pavimento.
Uso	Non utilizzare il sistema di guida mentre non si è seduti sulla sedia.
Uso	Non guidare mentre la sedia è collegata al caricabatterie.
Uso	Il montaggio deve essere eseguito solo da personale qualificato.
Uso	Fai attenzione all'ambiente circostante.
Uso	Non guidare all'aperto o su superfici inclinate.
Superficie	L'uso della le Power Wheels su tappeti aumenta l'attrito e riduce la durata della batteria. Sconsigliamo pertanto qualsiasi utilizzo su tappeti e pavimenti morbidi.
Sicurezza	Per motivi di sicurezza, in caso di arresto improvviso della batteria, l'utente deve essere in grado di eseguire autonomamente un trasferimento da e verso la sedia.
Batteria	La batteria deve essere completamente ricaricata ogni sera/notte. Una maggiore frequenza di ricarica ridurrà la durata della batteria.
Uso	Questo accessorio non è compatibile con doppie ruote o rotazione del sedile.
Uso	Non calpestare il controller del motore, situato nella parte inferiore del telaio della sedia tra le ruote posteriori.
Uso	Il freno NON è collegato al sistema di guida. Utilizza il freno come descritto nella sezione 1.4.8.

## 1.2. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Le istruzioni di montaggio 106234 si trovano sul sito web di VELA: [www.vele.eu](http://www.vele.eu)

Errore	Causa	Soluzione
Codice errore C1 sul display	L'altezza della sedia è regolata troppo alta. Il meccanismo di limitazione dell'altezza è difettoso.	Abbassa l'altezza della sedia. Rivedi nuovamente le istruzioni di montaggio, passo 3, n. 14.
Codice errore C8 sul display	Batteria scarica	Carica la sedia.
Codice errore C2 sul display	Il joystick non era in posizione neutra quando è stato attivato il sistema di guida.	Rilascia il joystick e riavvia il sistema di guida.
Coppia insufficiente	Tappeti spessi o allentati, pavimentazioni morbide Superficie inclinata Batteria scarica Alta resistenza al rotolamento Regolatore di velocità abbassato	Evita questi tipi di pavimentazione. Non guidare su superfici inclinate. Carica la sedia. Assisti con i piedi. Aumenta la velocità. Vedi sezione 1.4.3.
Alta resistenza durante l'avanzamento con i piedi	Sistema di guida acceso	Spegni il sistema di guida.

Se i passaggi sopra indicati non risolvono il problema, contatta il tuo fornitore VELA.

## 1.3. USO PREVISTO

Le Power Wheels è un accessorio per VELA Tango 700E e 600ES che offre all'utente un'assistenza aggiuntiva e prolunga così la possibilità di svolgere in modo autonomo le attività quotidiane in ambienti interni. Non sostituisce una sedia a rotelle elettrica, ma rappresenta un supporto per gli utenti che necessitano di aiuto per muovere la propria sedia.

### 1.3.1.1 SEGUENTI FATTORI POSSONO INFLUENZARE LA CAPACITÀ DELLA BATTERIA

**Uso prolungato:** Una sedia da lavoro con Power Wheels deve essere utilizzata nello stesso modo di una sedia da lavoro senza Power Wheels. Ciò significa che l'utente "spinge/cammina" la sedia stando seduto. Se la sedia viene utilizzata con i piedi posizionati su un poggiatesta durante la marcia, la durata della batteria si riduce.

**Peso elevato dell'utente:** Se l'utente pesa circa 100 kg o più, ciò può influire sulla capacità della batteria e quindi sul tempo di funzionamento.

**Superficie:** La sedia da lavoro con propulsione ha prestazioni ottimali su pavimenti duri come legno o linoleum. L'uso della le Power Wheels su tappeti aumenta l'attrito e riduce la durata della batteria. Pertanto si sconsiglia qualsiasi utilizzo su tappeti e pavimenti morbidi.

**Ricarica:** La batteria deve essere completamente ricaricata ogni sera/notte. Una maggiore frequenza di ricarica ridurrà la durata della batteria.


**Nota: Una combinazione di più o di tutti i fattori sopra elencati ridurrà notevolmente la durata della batteria.**

### 1.3.2. CONTROINDICAZIONI

Per motivi di sicurezza, in caso di arresto della batteria, l'utente deve essere in grado di eseguire autonomamente un trasferimento da e verso la sedia.




## 1.4. IMPOSTAZIONI

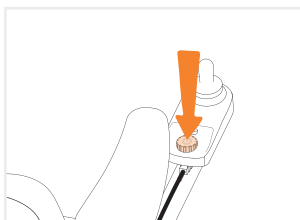


### 1.4.1. ACCENDERE/SPEGNERE IL SISTEMA DI GUIDA

Accendere il sistema di guida premendo il pulsante on/off sul controller. Spegnerlo premendo di nuovo. Il sistema di guida si spegne automaticamente dopo 5 minuti di inattività.

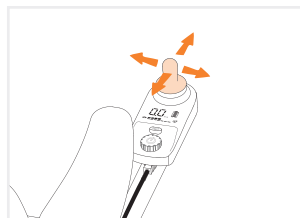


### 1.4.2. STERZATA

Utilizzare il joystick sul controller per controllare intuitivamente la direzione e la velocità. Nota che c'è una graduale accelerazione e decelerazione per garantire una guida fluida. Puoi guidare solo usando il sistema di guida o combinarlo con l'uso dei piedi per assistenza.

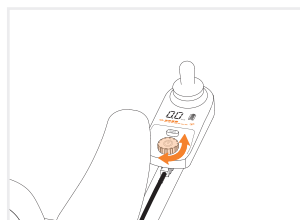


### 1.4.3. CONTROLLO DELLA VELOCITÀ

Ruota il pulsante on/off su entrambi i lati per regolare la velocità massima. La scala va da piena velocità a metà velocità. **Nota:** la coppia è collegata alla velocità, quindi a velocità più elevate, sarai in grado di superare meglio tappeti ecc.

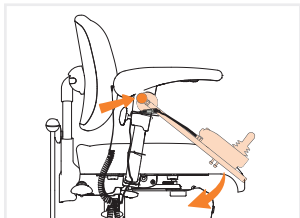


### 1.4.4. JOYSTICK PIEGHEVOLE

Per poter avvicinarti al tavolo o semplicemente per togliere il joystick di mezzo quando non lo usi, puoi piegare il controller. Premi il pulsante arancione e la gravità farà abbassare il joystick. Per rimetterlo a posto, solleva semplicemente il joystick di nuovo. **Nota:** non puoi premere il pulsante mentre c'è peso applicato sul joystick.

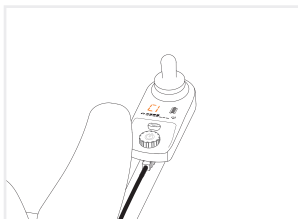


#### **1.4.5. LIMITAZIONE DELL'ALTEZZA**

Per motivi di sicurezza, la sedia non può muoversi quando la regolazione dell'altezza è impostata troppo alta. Il controller taglia automaticamente l'alimentazione alle ruote se l'impostazione di guida è troppo alta. Questo può essere visto sul controller quando viene visualizzato "C1" sul display. Si riattiva automaticamente quando l'altezza viene ridotta a un livello accettabile.

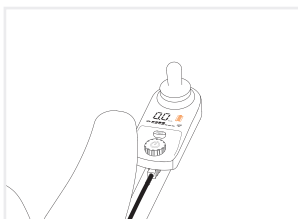


#### **1.4.6. INDICATORE DELLA BATTERIA**

Sul controller è presente un indicatore della batteria che è attivo quando il sistema di guida è acceso. La regolazione dell'altezza e il sistema di guida utilizzano la stessa batteria, quindi la sedia si carica normalmente. Nota che l'indicatore potrebbe sottostimare la capacità della batteria in caso di uso eccessivo. Ricarica ogni giorno.

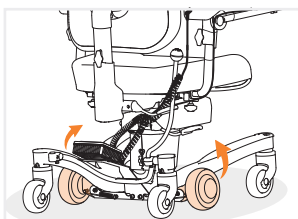


#### **1.4.7. RUOTE RIBALTABILI**

Le ruote possono essere ribaltate per consentire alla sedia VELA di funzionare completamente come faceva senza il sistema di guida. Solleva semplicemente le ruote motrici a mano fino a quando non toccano il telaio. Poi potrai spostare la sedia lateralmente di nuovo. Per riattivare le ruote motrici, spingile semplicemente di nuovo verso il basso.

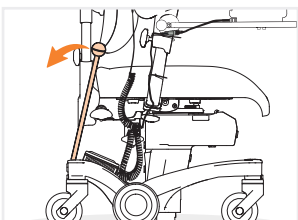

#### **1.4.8. FRENATA**

Il freno che conosci dalla tua sedia VELA non è collegato al sistema di guida. Pertanto, ricordati di sbloccare il freno prima di guidare. Nota: questo vale sia per i freni manuali che elettrici.

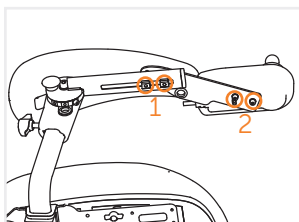

#### 1.4.9. REGOLAZIONE DEL JOYSTICK

Il joystick può essere regolato in profondità e in larghezza. Allentare le due viti (1) visibili accanto al joystick per regolare la posizione del joystick. Svitare le due viti (2) sotto il joystick per regolare l'angolazione. Ricordati di stringere di nuovo tutte e quattro le viti successivamente.



#### 1.4.10. RICARICA

Carica ogni giorno. Rimuovere la spina operativa dal retro del bracciolo e posizionarla nel caricabatterie come mostrato. Il caricabatterie è collegato a una presa elettrica. Quando la sedia è in carica, il LED sul caricabatterie è giallo. Quando la sedia è completamente carica, il LED diventa verde.

**Nota:** La sedia non deve essere utilizzata durante la carica.



