

NEW Aerolight-Classic

Gebrauchsanweisung

Produkt-Codes: AC6, AC9, AC12 & AC15

Verwendungszweck: Diese Rampen sind als Rollstuhlzubehör für Menschen mit Behinderungen gedacht, um sich in Bereichen mit unterschiedlichen Höhen zurechtzufinden.

Vor der Benutzung

- Entfernen Sie alle Verpackungen und vergewissern Sie sich, dass die Rampen beim Transport nicht beschädigt worden sind. Bewahren Sie die Verpackung auf.
- Lesen Sie die Anweisungen und Warntexte sorgfältig durch, bevor Sie die Rampen benutzen.
- Anweisungen zum Nachschlagen aufbewahren.
- Auf jeder Rampe finden Sie ein Etikett, das die maximal zulässige Belastung für die Rampe angibt.

Zu Verwenden

1. Die Rampe am Griff tragen
2. Vergewissern Sie sich, dass der Boden/Untergrund sowohl auf der oberen als auch auf der unteren Ebene fest und stabil ist.
3. Prüfen Sie, ob die Rampe lang genug ist, um die Stufe bzw. den Höhenunterschied abzudecken. Die Rampen sind für eine Steigung zwischen 1:4 und 1:20 ausgelegt (abhängig von der sicheren Anwendung und den Nutzungsanforderungen).
4. Legen Sie die Rampe so an, dass sich die Lippe vollständig auf der oberen Ebene befindet zentral zur gewählten Route (Bild A). Das einzigartige Design am Ende der Lippe hält die Rampe in Position.
5. Sicherstellen, dass die Rampen bei der Benutzung nicht verrutschen. Prüfen Sie bei jeder Benutzung, ob die Rampen fest stehen und stabil sind.



Wartung

- Wenn die Rampen beschädigt oder in irgendeiner Weise rutschig sind, sollten sie nicht benutzt werden (Lieferant/Hersteller kontaktieren).
- Die Rampen können mit normalen Reinigungsmitteln gereinigt werden und vor der Verwendung trocknen lassen.
- Empfohlene maximale Reinigungstemperatur 50°C, für weitere Details zur Verwendung mit industriellen Reinigungsmaschinen bitte anfragen.
- Für die Entsorgung dieser Produkte, Bitte setzen Sie sich mit einem Metallrecyclingunternehmen in Verbindung.

Garantie

- Aerolight-Rampen sind für die Nutzung durch Behinderte/Mobilität konzipiert und optimiert.
- Die Rampen haben eine umfassende 2-Jahres-Garantie bei normalem Gebrauch, Bedingungen gelten.
- Eine andere Verwendung als die veröffentlichte/vorgesehene führt zum Erlöschen der Garantie.
- Die Rampen sind nicht für den dauerhaften Einsatz im Freien konzipiert und dürfen nicht festgeschrieben runter.



NEW Aerolight-Classic

Gebrauchsanweisung

Produkt-Codes: AC6, AC9, AC12 & AC15

Verfügbares Zubehör (für die Bestellung mit dem Lieferanten/Hersteller Kontakt aufnehmen)

- Warnkegel **AWC**
- Wandgurt-Bausatz **AWK**
- Horizontal Lagerung Halterung Bausatz **ASB**
- Andere verfügbare Produkte sind leichte Plattformen Rampenverbindungsstützen und Handlaufbausätze.


Code	Länge	Rampenbreite	Endlippenbreite	Belastbarkeit	Gewicht
AC6	60cm (2ft)	76cm (30ins)	71.4cm (28.1ins)	400kg (63st)	4.2kg (9lbs)
AC9	90cm (3ft)	76cm (30ins)	71.4cm (28.1ins)	350kg (55st)	5.4kg (12lbs)
AC12	120cm (4ft)	76cm (30ins)	71.4cm (28.1ins)	350kg (55st)	6.8kg (15lbs)
AC15	150cm (5ft)	76cm (30ins)	71.4cm (28.1ins)	350kg (55st)	8.2kg (18lbs)

Steigung/Gefälle

1:6 (10')		Höhe	in einigen Fällen akzeptabel für den Zugang mit Unterstützung und für Elektrorollstühle
1:8 (8')		Höhe	ein gutes Gleichgewicht zwischen Gefälle und Platzbedarf, geeignet für Veranstaltungen usw.
1:12 (5')		Höhe	oft von Sozialeinrichtungen / lokalen Behörden gefordert.
1:15 (4')		Höhe	öffentlicher Bereich / selbstständiger Zugang

Rampenlänge

- a. Messen der Stufenhöhe / Höhenunterschied (Gesamthöhe der Stufen oder Höhe bis zum Auflagepunkt am Fahrzeug)

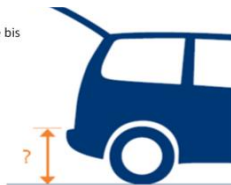

- b. Verwenden Sie den Rampenlängen-Leitfaden, um zu entscheiden, welche Länge Sie benötigen

Rampenlängen-Leitfaden

Stufenhöhe / Höhenunterschied (bis zu)	Länge bei 1:6	Länge bei 1:8	Länge bei 1:12
10cm (4")	60cm (2')	80cm (2' 7")	120cm (3' 11")
15cm (6")	90cm (2' 11")	120cm (3' 11")	180cm (5' 11")
20cm (8")	120cm (3' 11")	160cm (5' 3")	240cm (7' 10")
25cm (10")	150cm (4' 11")	200cm (6' 7")	300cm (9' 10")
30cm (1')	180cm (5' 11")	240cm (7' 10")	360cm (11' 10")
45cm (1' 6")	270cm (8' 10")	360cm (11' 10")	540cm (17' 9")
60cm (2')	360cm (11' 10")	480cm (15' 9")	720cm (23' 7")