

NEW Aerolight-Broadfold

Instructions d'utilisation

Codes de produit : AB15, AB18, AB21, AB24

Destination : Ces rampes sont destinées à être utilisées comme un accessoire de fauteuil roulant pour les personnes handicapées afin de naviguer dans des zones de différentes hauteurs.

Avant utilisation

- Retirez tous les emballages et assurez-vous que les rampes n'ont pas été endommagées pendant le transport. Conserver l'emballage.
- Lisez attentivement les instructions et les textes d'avertissement avant d'utiliser les rampes.
- Gardez les instructions pour référence.
- Sur chaque rampe, vous trouverez une étiquette indiquant la charge maximale autorisée pour la rampe.

Pour déployer

1. Portez la rampe, en utilisant les deux poignées ensemble.
2. Assurez-vous que le sol/la surface aux niveaux supérieur et inférieur est ferme et stable.
3. La rampe de contrôle est suffisamment longue pour couvrir le pas/la montée. Les rampes sont conçues pour une utilisation entre 1:4 et 1:20 gradient (en fonction des exigences de sécurité d'application et d'utilisation).
4. Ouvrez la rampe (pic. A).
5. Placez la rampe en position avec le rebord entièrement au niveau supérieur, au centre de l'itinéraire choisi (photo B). Le design unique des lèvres d'extrémité maintient la rampe en position.
6. Assurez-vous que les rampes ne se délogent pas lors de l'utilisation. Les rampes de contrôle sont fermement situées et stables chaque fois qu'elles sont utilisées.
7. Pour le stockage, pliez à nouveau la rampe ensemble.



A



B



C

Maintenance

- Si les rampes sont endommagées ou glissantes de quelque manière que ce soit, elles ne doivent pas être utilisées (contacter le fournisseur/fabricant).
- Les rampes peuvent être nettoyées avec des produits de nettoyage normaux et laissées à sécher avant utilisation.
- Température de nettoyage maximale recommandée 50°C, veuillez vous renseigner pour plus de détails sur l'utilisation avec des machines de nettoyage industriel
- Pour l'élimination de ces produits, veuillez contacter un entrepreneur en recyclage des métaux. Si vous n'avez plus besoin de ce produit et qu'il vous a été prêté par une autorité locale, veuillez contacter eux pour discuter de son retrait de votre propriété.

Garantie

- Les rampes Aerolight sont conçues et optimisées pour une utilisation en cas de handicap/mobilité
- Les rampes portent une garantie complète de 2 ans pour une utilisation normale, des conditions s'appliquent.
- Une utilisation autre que celle publiée/prévue annulera la garantie.
- Les rampes ne sont pas conçues pour une utilisation permanente à l'extérieur et ne doivent pas être fixées.



NEW Aerolight-Broadfold

Instructions d'utilisation

Codes de produit : AB15, AB18, AB21, AB24

- Toute modification/réparation autre que par le fabricant annulera la garantie.
- Les rampes ne seront pas réparées/remplacées si la plaque du numéro de série a été retirée/remplacée.
- **Accessoires disponibles** (contacter le fournisseur/fabricant pour commander)
- Cône d'avertissement **AWC**
- Kit de sangle murale **AWK**

Code	Longueur	Largeur de rampe*	Largeur des lèvres	Capacité	Poids	Dimensions Stockées LxWxD
AB15	150cm (5)	76cm (30)	71,4cm (28.1)	350kg (55st)	12.1kg (27lbs)	80 x 19 x 76cm (31 x 7 x 30ins)
AB18	180cm (6)	76cm (30)	71,4cm (28.1)	350kg (55st)	13.5kg (30lbs)	95 x 19 x 76cm (37 x 7 x 30ins)
AB21	210cm (7)	76cm (30)	71,4cm (28.1)	300kg (47st)	14.9kg (33lbs)	110 x 19 x 76cm (43 x 7 x 30ins)
AB24	240cm (8)	76cm (30)	71,4cm (28.1)	250kg (30st)	16.4kg (36lbs)	125 x 19 x 76cm (49 x 7 x 30ins)


NEW Aerolight-Broadfold

Instructions d'utilisation

Codes de produit : AB15, AB18, AB21, AB24

Longueur de

- a.** Measure the step height / level difference.
(Total height of steps or height to resting point on vehicle).

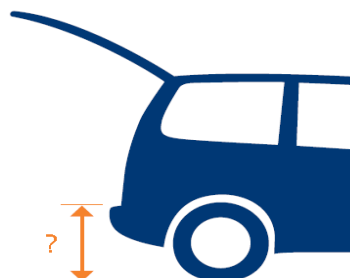

- b.** Use the Ramp Length Guide to decide which length you need.

Ramp Length Guide

Step height/level difference (up to)	Length at 1:6	Length at 1:8	Length at 1:12
10cm (4")	60cm (2')	80cm (2' 7")	120cm (3' 11")
15cm (6")	90cm (2' 11")	120cm (3' 11")	180cm (5' 11")
20cm (8")	120cm (3' 11")	160cm (5' 3")	240cm (7' 10")
25cm (10")	150cm (4' 11")	200cm (6' 7")	300cm (9' 10")
30cm (1')	180cm (5' 11")	240cm (7' 10")	360cm (11' 10")
45cm (1' 6")	270cm (8' 10")	360cm (11' 10")	540cm (17' 9")
60cm (2')	360cm (11' 10")	480cm (15' 9")	720cm (23' 7")

Gradient/Pente

1:6 (10°)



Acceptable in some cases for assisted access and powered wheelchairs.

1:8 (8°)




A good balance between gradient and space use, suited for events etc.

1:12 (5°)



Often required by social services/local authorities. Minimum required Building Regs Doc M for installed ramps.

1:15 (4°)

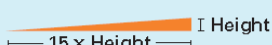

Sometimes required by social services/local authorities for independent access.