

NEW Aerolight-Broadfold

Istruzioni per l'uso

Codici prodotto : AB15, AB18, AB21, AB24


Scopo previsto: Queste rampe sono destinate ad essere utilizzate come accessorio per sedie a rotelle per persone con disabilità per navigare in aree di diverse altezze.

Prima del l'uso

- Rimuovere tutti gli imballaggi e assicurarsi che le rampe non siano state danneggiate durante il trasporto. Conservare l'imballaggio.
- Leggere attentamente le istruzioni e i testi di avvertimento prima di utilizzare le rampe.
- Tenere le istruzioni per riferimento.
- Su ogni rampa troverete un'etichetta che mostra il carico massimo consentito per la rampa.

Per distribuire

1. Trasportare la rampa utilizzando entrambe le maniglie insieme.
2. Assicurarsi che il terreno/la superficie sia al livello superiore e inferiore sia solido e stabile.
3. La rampa di controllo è sufficientemente lunga da coprire il gradino/la salita. Le rampe sono progettate per l'uso tra 1:4 e 1:20 gradiente (a seconda di applicazione sicura e requisiti di utilizzo).
4. Aprire la rampa (fig. A).
5. Mettere la rampa in posizione con il labbro completamente sul livello superiore, centrale al percorso scelto (pic. B). Il design unico delle estremità mantiene la rampa in posizione.
6. Assicurarsi che le rampe non si sfalsino durante l'uso. Verificare che le rampe siano ben posizionate e stabili ogni volta che vengono utilizzate.
7. Per lo stoccaggio piegare la rampa di nuovo insieme.

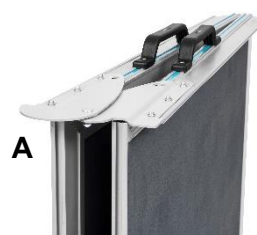

Manutenzione

- Se le rampe diventano danneggiate o scivolose in qualsiasi modo non devono essere utilizzate (contattare il fornitore/ produttore).
- Le rampe possono essere pulite con i normali prodotti di pulizia e lasciate asciugare prima dell'uso.
- Temperatura di pulizia massima raccomandata 50 °C, si prega di informarsi per ulteriori dettagli sull'uso con macchine per la pulizia industriale
- Per lo smaltimento di questi prodotti, si prega di mettersi in contatto con un appaltatore per il riciclaggio dei metalli. Se non avete più bisogno di questo prodotto e vi è stato prestato da un'autorità locale, si prega di contattare di discuterne la rimozione dalla vostra proprietà.

Garanzia

- Le rampe Aerolight sono progettate e ottimizzate per l'uso da disabili/portatori di handicap
- Le rampe hanno una garanzia completa di 2 anni per l'uso normale, si applicano le condizioni.
- Un uso diverso da quello pubblicato/previsto annullerà la garanzia.
- Le rampe non sono progettate per l'uso permanente all'aperto e non devono essere fissate a terra.
- Qualsiasi modifica/ riparazione diversa dal produttore annullerà la garanzia.
- Le rampe non saranno riparate/sostituite se la targa del numero di serie è stata rimossa/sostituita.



NEW Aerolight-Broadfold

Istruzioni per l'uso


Codici prodotto : AB15, AB18, AB21, AB24


- Accessori **disponibili** (contattare il fornitore/ produttore per ordinare)
- Cono di avvertimento **AWC**
- Kit di cinghie da parete **AWK**

Codice	Lunghezza	Larghezza della rampa*	Larghezza a labbra	Capacità	Peso	Dimensioni memorizzate LxWxD
AB15	150 cm (5)	76cm (30)	71,4 cm (28,1)	350 kg (55 st)	12,1 kg (27 libbre)	80 x 19 x 76cm (31 x 7 x 30ins)
AB18	180cm (6)	76cm (30)	71,4 cm (28,1)	350 kg (55 st)	13,5 kg (30 libbre)	95 x 19 x 76cm (37 x 7 x 30ins)
AB21	210 cm (7)	76cm (30)	71,4 cm (28,1)	300kg (47st)	14,9 kg (33 libbre)	110 x 19 x 76cm (43 x 7 x 30ins)
AB24	240 cm (8)	76cm (30)	71,4 cm (28,1)	250kg (30st)	16,4 kg (36 libbre)	125 x 19 x 76cm (49 x 7 x 30ins)



RampCentre è un marchio registrato di Enable Access, LU7 4UH. Adottiamo una politica di revisione e ricerca continua, che può portare a cambiamenti nell'aspetto e nelle specifiche del prodotto. Data di pubblicazione: 15 agosto 2022

 Enable Access, unità R, Cherrycourt Way, Leighton Buzzard, LU7 4UH, Regno Unito.

 Enable Access Global Ltd, 27 Phibsboro Place, Dublin 7, D07 V20, Repubblica d'Irlanda

Per assistenza tecnica o informazioni sul vostro rivenditore più vicino si prega di


NEW Aerolight-Broadfold

Istruzioni per l'uso

Codici prodotto : AB15, AB18, AB21, AB24

Lunahezza

- a. Measure the step height / level difference.
(Total height of steps or height to resting point on vehicle).

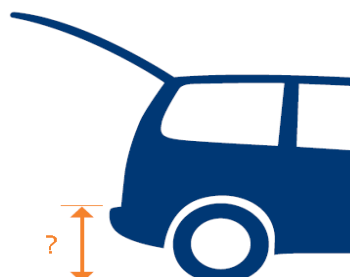

- b. Use the Ramp Length Guide to decide which length you need.

Ramp Length Guide

Step height/level difference (up to)	Length at 1:6	Length at 1:8	Length at 1:12
10cm (4")	60cm (2')	80cm (2' 7")	120cm (3' 11")
15cm (6")	90cm (2' 11")	120cm (3' 11")	180cm (5' 11")
20cm (8")	120cm (3' 11")	160cm (5' 3")	240cm (7' 10")
25cm (10")	150cm (4' 11")	200cm (6' 7")	300cm (9' 10")
30cm (1')	180cm (5' 11")	240cm (7' 10")	360cm (11' 10")
45cm (1' 6")	270cm (8' 10")	360cm (11' 10")	540cm (17' 9")
60cm (2')	360cm (11' 10")	480cm (15' 9")	720cm (23' 7")

Pendenza/pend

1:6 (10°)



Acceptable in some cases for assisted access and powered wheelchairs.

1:8 (8°)



A good balance between gradient and space use, suited for events etc.

1:12 (5°)



Often required by social services/local authorities. Minimum required Building Regs Doc M for installed ramps.

1:15 (4°)



Sometimes required by social services/local authorities for independent access.