

doorline-multi™

Gebruiksaanweisung

Produkt-Codes: DM5, DM7



Verwendungszweck: Diese Rampen sind als Rollstuhlzubehör für Menschen mit Behinderungen gedacht, um sich in Bereichen mit unterschiedlichen Höhen zurechtzufinden.

Before use

- Alle Verpackungen entfernen und aufbewahren.
- Stellen Sie sicher, dass die Rampe während des Transports oder der Lagerung nicht beschädigt wurde.
- Lesen Sie die Anleitungen und Warnhinweise vor der Benutzung der Rampen sorgfältig durch. Anleitungen zum Nachschlagen aufbewahren.
- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund fest und stabil ist und die vorgesehene Last tragen kann.
- Die Kapazität der Rampe beträgt 300kg (661lbs) unter der Annahme, dass die Rampe auf der Schwelle.

Hinweis: Der Griff kann auf die andere Seite der Rampe versetzt werden, wenn dies bequemer ist. Verwenden Sie einen 10-mm-Schraubenschlüssel für die Befestigungen und achten Sie auf scharfe Kanten an den Löchern des Griffrohrs, wenn es entfernt wird. Nicht zu fest anziehen.

Einsetzen

1. Positionieren Sie die Rampe so, dass die Lippe auf der Schwelle aufliegt (Bild 1).
2. Stellen Sie sicher, dass sich die Rampe bei der Benutzung nicht verschiebt. Vergewissern Sie sich bei jeder Benutzung, dass die Rampe fest steht und stabil ist. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Rampe benutzen, damit kein Teil des Rollstuhls daran hängen bleibt und sie verschiebt sie.
3. Um die Rampe zu tragen, Verwenden Sie den klappbaren Tragegriff (Bild 2).

Wartung

- Wenn die Rampen beschädigt oder in irgendeiner Weise rutschig sind, dürfen sie nicht verwendet werden (wenden Sie sich an den Lieferanten/Hersteller).
- Die Rampen können gereinigt werden mit normale Reinigungsmittel und vor dem Gebrauch trocknen lassen.
- Maximal empfohlene Reinigungstemperatur 50°C; für weitere Details zur Verwendung mit industriellen Reinigungsmaschinen bitte anfragen.

Recycling

- Für die Entsorgung dieses Produkts wenden Sie sich bitte ein Unternehmen für Metallrecycling.
- Alle Materialien der Rampen sind zu 100% recycelbar. Entfernen Sie alle Gummiteile und führen Sie die Aluminiumteile dem Metallrecycling zu.
- wenn Sie dieses Produkt nicht mehr benötigen und es wurde an Sie ausgeliehen durch eine lokale Behörde, bitte kontaktieren Sie sie, um zu diskutieren.

Garantie

- Die Rampen haben eine umfassende 2-Jahres-Garantie bei normalem Gebrauch, Bedingungen gelten.
- Any use other than the published/intended use will invalidate the warranty.
- Die Rampen sind nicht für den dauerhaften Einsatz im Freien konzipiert und dürfen nicht fixiert werden.
- Jede Änderung/Reparatur, die nicht vom Hersteller vorgenommen wird, führt zum Erlöschen der Garantie.

Bild 1



Bild 2



doorline-multi™

Gebrauchsanweisung

Produkt-Codes: DM5, DM7

Schlüssel product Informationen

Code	Maximal empfohlene Höhe	Gesamtlänge	Belastbarkeit	Gewicht
DM5	10cm (3.9ins)	56cm (22ins)	300kg (47st)	3.6kg (7.8lbs)
DM7	13cm (5.1ins)	74cm (29ins)	300kg (47st)	4.7kg (10.4lbs)


Die Breite für alle Doorline-multi Rampen beträgt 70cm (28ins)

Steigung/Gefälle

1:6 (10')		Höhe 6 x Höhe	in einigen Fällen akzeptabel für den Zugang mit Unterstützung und für Elektrorollstühle
1:8 (8')		Höhe 8 x Höhe	ein gutes Gleichgewicht zwischen Gefälle und Platzbedarf, geeignet für Veranstaltungen usw
1:12 (5')		Höhe 12 x Höhe	oft von Sozialeinrichtungen / lokalen Behörden gefordert.
1:15 (4')		Höhe 15 x Höhe	öffentlicher Bereich / selbstständiger Zugang

Rampenlänge

- a. Messen der Stufenhöhe / Höhenunterschied (Gesamthöhe der Stufen oder Höhe bis zum Auflagepunkt am Fahrzeug)

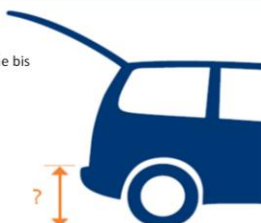

- b. Verwenden Sie den Rampenlängen-Leitfaden, um zu entscheiden, welche Länge Sie benötigen

Rampenlängen-Leitfaden

Stufenhöhe / Höhenunterschied (bis zu)	Länge bei 1:6	Länge bei 1:8	Länge bei 1:12
10cm (4")	60cm (2')	80cm (2' 7")	120cm (3' 11")
15cm (6")	90cm (2' 11")	120cm (3' 11")	180cm (5' 11")
20cm (8")	120cm (3' 11")	160cm (5' 3")	240cm (7' 10")
25cm (10")	150cm (4' 11")	200cm (6' 7")	300cm (9' 10")
30cm (1')	180cm (5' 11")	240cm (7' 10")	360cm (11' 10")
45cm (1' 6")	270cm (8' 10")	360cm (11' 10")	540cm (17' 9")
60cm (2')	360cm (11' 10")	480cm (15' 9")	720cm (23' 7")