

Le papillonrampe™

Mode d'emploi

Codes produits :DVBM, DVBL

Objectif prévu : Ces rampes sont destinées à être utilisées comme fauteuil roulant accessoire permettant aux personnes handicapées de se déplacer dans des zones de différentes hauteurs.

Avant utilisation



- Retirez et conservez tous les emballages.
- Assurez-vous que la rampe n'a pas été endommagée pendant le transport ou le stockage.
- Lisez attentivement les instructions et les avertissements avant d'utiliser la rampe. Conservez-les pour référence.
- Assurez-vous que la surface aux deux niveaux est ferme, stable et capable de supporter la charge prévue.

Déployer

1. Pour transporter la rampe, utilisez le trou de transport spécial pour les doigts.



2. Positionnez la rampe de manière à franchir le seuil. La partie centrale de la rampe papillon doit être bien à plat et de niveau sur le seuil.

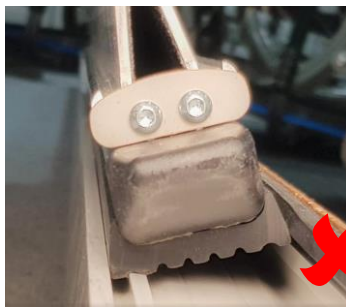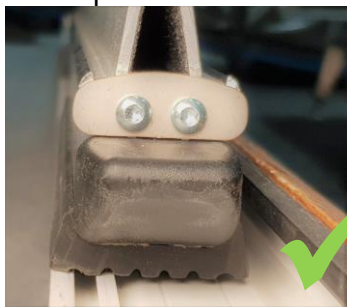

3. Les extrémités Gripline des deux côtés de la rampe doivent reposer fermement sur la surface plane.



4. La rampe Butterfly peut franchir en toute sécurité le gâche de la serrure pour les portes doubles

Le papillonrampe™

Mode d'emploi

Codes produits :DVBM, DVBL



5. Assurez-vous que les rampes ne se déplacent pas pendant l'utilisation. Vérifiez qu'elles sont bien fixées et stables à chaque utilisation. Soyez prudent lors de l'utilisation des rampes : aucune partie du fauteuil roulant ne les accroche et ne les déplace.

Entretien

- Si la rampe est endommagée ou glissante de quelque façon que ce soit, elle ne doit pas être utilisée (contactez le fournisseur/fabricant).
- La rampe peut être nettoyée avec des produits de nettoyage normaux et laissée sécher avant utilisation.
- Température de nettoyage maximale recommandée 50°C ; veuillez nous contacter pour plus de détails sur l'utilisation avec des machines de nettoyage industrielles.

Recyclage

- Si vous n'avez plus besoin de ce produit et qu'il vous a été prêté par votre commune ou une association caritative, veuillez contacter le service qui vous l'a prêté et discuter de son retour ou de son retrait de votre propriété. S'il s'agit de votre propre produit et que vous souhaitez vous en débarrasser, veuillez contacter un service de recyclage local.
- Tous les matériaux des rampes sont 100 % recyclables. Détachez tous les éléments en caoutchouc et envoyez les pièces en aluminium au centre de recyclage des métaux.

Garantie

- La rampe bénéficie d'une garantie complète de 2 ans pour une utilisation normale, des conditions s'appliquent.
- Toute utilisation autre que celle publiée/prévue annulera la garantie.
- Les rampes ne sont pas conçues pour une utilisation extérieure permanente et ne doivent pas être fixées.
- Toute modification/réparation autre que celle effectuée par le fabricant annulera la garantie.



Le papillonrampe™

Mode d'emploi

Codes produits :DVBM, DVBL

Informations clés sur le produit

Code	Plage de hauteur	Largeur	Capacité	Poids	Dimensions stockées L x H x P
DVBM	0 cm -10 cm plus (0 pouces – 4 pouces et plus)	70 cm (28 pouces)	350 kg (55 st)	6,8 kg (15 lb)	70 x 48 x 4 cm (28 x 19 x 1,5 pouces)
DVBL	0 cm – 15 cm et plus (0 pouces – 6 pouces et plus)	70 cm (28 pouces)	350 kg (55 st)	9,1 kg (20 lb)	70 x 63 x 4 cm (28 x 25 x 1,5 pouces)



RampCentre est une marque déposée d'Enable Access, LU7 4UH. Nous menons une politique d'analyse et de recherche continue, susceptible d'entraîner des modifications de l'apparence et des spécifications de nos produits. Date de publication : 15 août 2022



Enable Access, Unité R, Cherrycourt Way, Leighton Buzzard, LU7 4UH, Royaume-Uni.



Enable Access Global Ltd, 27 Phibsboro Place, Dublin 7, D07 V20, République d'Irlande