
GRIPO

MODE D'EMPLOI

FRANÇAIS

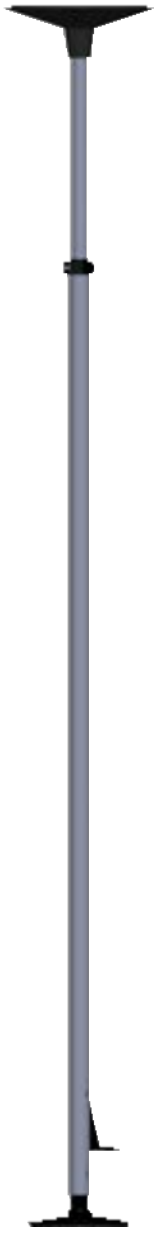

CE

HEPRO

Avant-propos

Le Gripo est une barre d'appui verticale qui s'installe entre le sol et le plafond. Le Gripo aide l'utilisateur à se lever, à s'asseoir et à se tenir debout. L'objectif du Gripo est de permettre aux utilisateurs d'accomplir leurs tâches quotidiennes de manière autonome ou avec davantage d'autonomie, notamment en matière d'hygiène personnelle et d'utilisation des toilettes. Le Gripo s'adapte à tous les intérieurs et est très facile à installer. La barre d'appui fonctionne parfaitement seule, mais peut également être complétée par des accessoires utiles.

La barre d'appui a été testée et homologuée conformément à la norme EN 12182:2012, ainsi qu'en matière de résistance à la corrosion selon les normes ISO 9227:2017 et ASTM G154-16. Elle est fabriquée en aluminium et en plastique et est destinée à être calée entre le sol et le plafond dans toutes les pièces où le plafond et le sol sont suffisamment solides pour supporter une charge ponctuelle de 100 kg.
À chaque extrémité de la barre se trouve une plaque d'extrémité en forme de disque avec une bague de friction intégrée.
La force de serrage de 900 N (soit environ 100 kg) entre les plaques d'extrémité est maintenue par un ressort à gaz.

Cela signifie que la barre peut être installée sans aucun vissage et que son démontage ne laisse aucune trace de montage sur le sol ou le plafond.
Grâce à divers accessoires, la barre peut être adaptée à de nombreuses situations d'utilisation différentes. Hepro propose 3 modèles différents adaptés au domaine d'application souhaité. Les barres sont livrées en couleur aluminium naturel, avec des tubes en aluminium anodisé et toutes les pièces en plastique de couleur noire.

Hepro est un fabricant et peut donc proposer des solutions sur mesure si nécessaire.

Hepro est une entreprise industrielle norvégienne qui développe, fabrique et commercialise des aides techniques destinées aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite. Fondée en 1987, l'entreprise emploie actuellement environ 85 collaborateurs.

Le siège social et l'usine de l'entreprise sont situés à Rognan, dans le comté de Nordland.

Hepro AS, Tømmerveien 10, 8250 Rognan.

IMPORTANT !

Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser la barre d'appui Gripo.

Explication des symboles

Fabricant

Avertissement

Date de fabrication

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation


SN Numéro de série

Marquage CE

MD Dispositif médical

Contenu du produit

TIGE

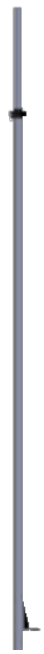

PLAQUE SUPÉRIEURE / PLAQUE DE BASE






RESSORT À GAZ



Sécurité

Ce produit est destiné à un usage domestique dans des logements privés ou des établissements.

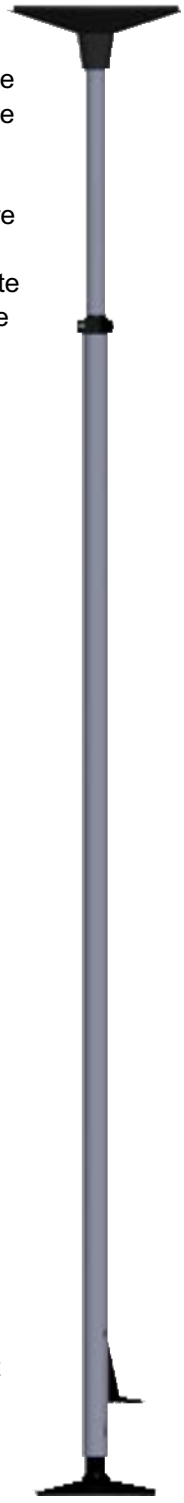

- Ne pas utiliser le produit si la bague de sécurité rouge située en haut de la tige est visible.
- Il existe un risque de coincement entre la tige et d'autres meubles ou objets. Placez la tige à une distance suffisante des autres meubles ou objets afin que l'utilisateur ne puisse pas se coincer entre la tige et ceux-ci.
- Ne pas installer le produit sur des objets non fixés solidement au sol ou au plafond, tels que des tapis, des dalles ou autres éléments similaires.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit.
- Ne l'installez que sur des surfaces planes et parallèles.
- En cas d'installation dans un environnement humide, l'utilisation d'un dispositif antidérapant est obligatoire ; réf. 35007.
- Le produit ne doit pas être modifié ou altéré de quelque manière que ce soit, sauf indication contraire dans le présent mode d'emploi.
- Utilisez le produit uniquement avec les accessoires officiels de Hepro.
- Gripo peut être installé dans la douche. Tous les composants de Gripo sont résistants à la corrosion et peuvent rester en contact permanent avec des liquides au pH neutre. Les liquides alcalins peuvent entraîner, à la longue, la corrosion de l'aluminium anodisé et avoir un impact négatif sur la durée de vie du produit. Il est donc recommandé de rincer Gripo à l'eau après avoir utilisé des liquides alcalins.
- Nettoyez et désinfectez le produit exclusivement conformément aux instructions de la section « NETTOYAGE ET DÉSINFECTION ».

LE KIT GRIPO COMPREND :
1 x plaque de base (petite plaque)
1 x plaque de supérieure (plaque plus grande)
1 x tige
1 x ressort à gaz
1 x mode d'emploi

VARIANTES

Référence	Article	Hauteur sous plafond
35200	Gripo	210 - 300 cm
35210 *	Gripo Long	260 - 320 cm
35202	Gripo Spécial	Moins de 210 cm

* Ce modèle dispose d'un tube d'extension plus long de 15 cm et permet de fixer des accessoires tout en haut de la perche.

Mode d'emploi

DÉVELOPPÉ ET FABRIQUÉ SELON :

- MDR 2017/745
- EN 12182:2012 16.2
- ISO 9227-2017 et ASTM G154-16

DOMAINE D'UTILISATION

Ce produit est destiné à un usage domestique dans des foyers privés ou des établissements. La barre d'appui Gripo doit être à température ambiante avant d'être installée.

POIDS DE L'UTILISATEUR

Poids maximal de l'utilisateur : 210 kg.

DURÉE DE VIE TECHNIQUE

La durée de vie prévue du produit est estimée à 5 ans, à condition qu'il soit utilisé correctement et conformément au présent mode d'emploi ainsi qu'aux consignes de sécurité et d'entretien qui y figurent.

ENTRETIEN

La durée de vie du ressort à gaz est prolongée si la tige est tendue au moins deux fois par an. Il convient de vérifier régulièrement que toutes les surfaces ne présentent pas de dommages. Aucune autre mesure d'entretien n'est nécessaire.


NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Nettoyez le produit avec une solution savonneuse douce, rincez-le à l'eau claire et séchez-le avec un chiffon absorbant. Pour la désinfection, utilisez un désinfectant de surface à base d'alcool disponible dans le commerce. Mode d'emploi : imprégnez entièrement le produit nettoyé et essuyé à l'eau avec le désinfectant. Au moins

Laisser agir pendant 30 secondes. Laisser sécher complètement à l'air libre avant utilisation. Lors de la désinfection, respectez les consignes d'utilisation et de sécurité fournies par le fabricant du désinfectant.

TROUVER LE NUMÉRO DE SÉRIE

Le numéro de série se trouve au bas du tube extérieur en aluminium du produit.

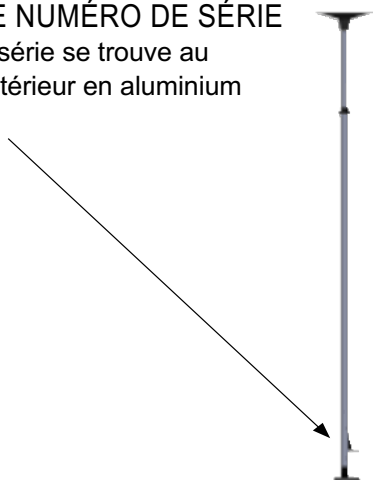

PUBLIC CIBLÉ

Ce produit est destiné aux personnes qui ont besoin d'aide ou de soutien pour se lever, s'asseoir ou se tenir debout au quotidien.

RECYCLAGE

Tige et pied	Aluminium 6061-T6
Pièces en plastique noir	PA6
Anneaux en caoutchouc souples	Mermoplastique Élastomère (TPE)
Pièces détachées	Acier inoxydable, cuivre et aluminium

Toutes les pièces doivent être recyclées conformément à la réglementation locale. Veuillez vous adresser au centre de recyclage de votre commune.

DIMENSIONS

Poids	4,7 kg
Hauteur	Voir tableau, page 5
Largeur de la plaque supérieure	290 mm

Concernant le montage

INDICATIONS MÉDICALES

Gripo est une barre d'appui verticale qui s'installe entre le sol et le plafond. Gripo aide l'utilisateur à se lever, à s'asseoir et à rester debout. L'objectif de Gripo est de permettre aux utilisateurs d'accomplir leurs tâches quotidiennes de manière autonome ou avec davantage d'autonomie, notamment en matière d'hygiène personnelle et d'utilisation des toilettes.


GRIPO est indiqué en cas de difficultés à utiliser des sièges, un lit, un lavabo, des toilettes, une baignoire ou une douche en raison d'une capacité limitée à se tenir debout ou assis, ou en cas de capacité réduite à s'asseoir ou à se lever de manière autonome, ou à se coucher ou à se lever du lit, en raison de :

- d'un dysfonctionnement des membres inférieurs dû à une mobilité réduite ou totalement absente des articulations et/ou
- d'une diminution de la force musculaire des membres inférieurs et/ou
- D'une lésion de la colonne lombaire entraînant une altération de la mobilité articulaire, avec une fonctionnalité suffisante des membres supérieurs et une stabilité suffisante du tronc.

Gripo s'intègre dans tous les intérieurs et est très facile à installer. La barre d'appui fonctionne parfaitement seule, mais peut également être complétée par des accessoires utiles.

CONTRE-INDICATIONS

Ce produit ne convient pas aux personnes ayant une faible force dans les bras, aux personnes présentant un très mauvais équilibre ou souffrant de troubles cognitifs importants. L'utilisation de cet accessoire comporte un risque de blessures en cas de montage incorrect ou d'utilisation inappropriée.
La barre ne doit pas être installée de manière à présenter un risque de pincement entre un meuble, un mur et la barre.
Gripo ne doit pas non plus être monté sur une surface instable. Le produit ne doit pas être utilisé sans formation préalable et avant d'avoir lu et compris le mode d'emploi.

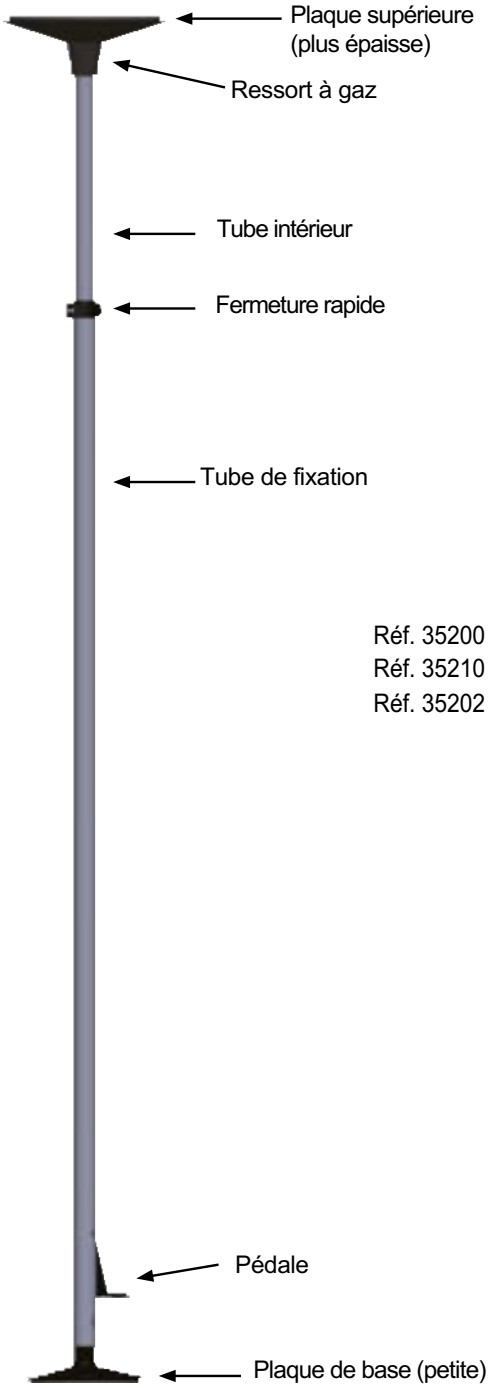

Réf. 35200
Réf. 35210
Réf. 35202

FIXER LE GRIPO AU PLAFOND

Avant d'installer le Gripo, il convient de vérifier la solidité de la structure du plafond et de s'assurer qu'il est possible de placer la barre à l'emplacement souhaité. Le plafond et le sol doivent être suffisamment solides pour supporter une charge ponctuelle de 100 kg.

Lors de l'installation du Gripo sur des plafonds en plâtre ou d'autres plafonds peu résistants, il est recommandé d'utiliser l'accessoire 35153 – « panneau supérieur large », qui assure un renfort supplémentaire entre la plaque supérieure de la barre et le plafond.



Faux




Utilisez la plaque supérieure large




Correct

Tenez toujours compte du risque de coincement entre la barre d'appui et les meubles.

Pour éviter tout risque de coincement entre le lit/la chaise et le Gripo, il est possible de monter une poignée circulaire d30 ou un accessoire adapté, comme indiqué sur les illustrations.

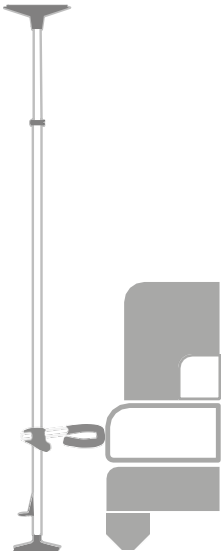

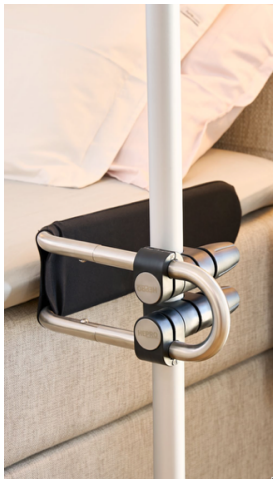

barrière de lit (art. 35328)

Montage

①

Avant de commencer le montage :

Placez la barre sur la petite plaque de base de manière à ce que la tige s'insère dans la rainure.

Enfoncez le ressort à gaz sur le tube intérieur et enfoncez-le jusqu’à la marque rouge d’avertissement.

Fixez la plaque supérieure sur la partie supérieure du ressort à gaz.


⚠	Une force de 100 kg est exercée sur le plafond.



②

Placez la barre d'appui à l'endroit approprié.

Retirez la pédale.

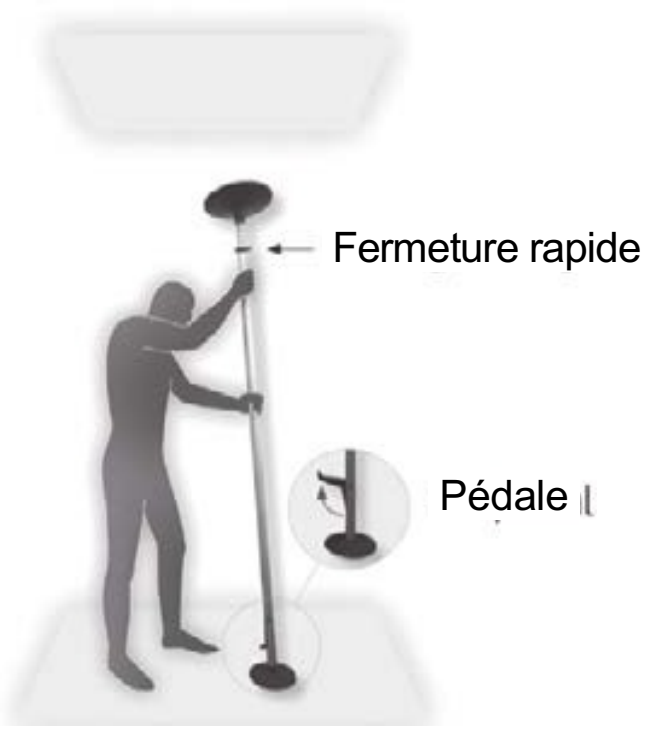

③

Poussez le tube intérieur vers le haut jusqu'à ce que la plaque supérieure touche le plafond. La plaque inférieure touche alors le sol.

Veillez à ce que la tige soit bien à la verticale.



4

Tournez le tube intérieur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le tube extérieur.



5


Serrez la fixation rapide.



6

Appuyez sur la pédale de pied vers le bas. Assurez-vous que le plafond supporte la charge et ne cède pas lorsque vous appuyez doucement sur la pédale de pied.

Vérifiez que le repère rouge a disparu. Si le repère rouge est visible, démontez la tige et recommencez à partir du point 2.

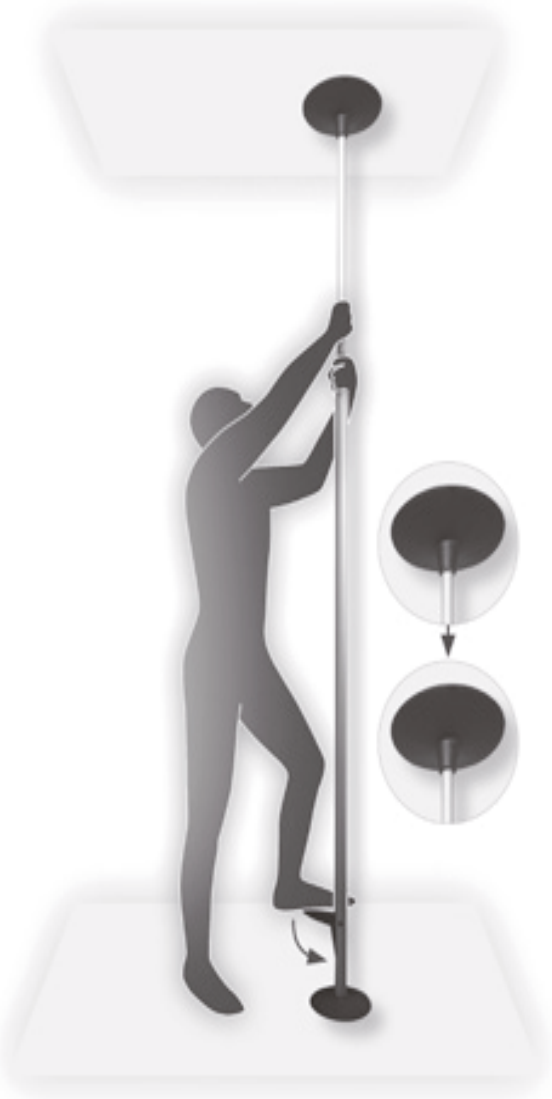

Veillez à ce que le repère rouge ne soit pas visible pendant l'utilisation. S'il venait à apparaître, démontez la barre et remontez-la. Vérifiez que la vis de serrage du raccord rapide n'est pas desserrée et que le tube intérieur est bien vissé. Si le repère rouge est toujours visible, cela peut s'expliquer par le fait que la structure du plafond n'est pas suffisamment solide.

Démontage

Ouvrez le raccord rapide et relevez la pédale de pied. Si nécessaire, tournez le tube intérieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Contrôle du fonctionnement du produit et des accessoires

Une fois le montage terminé, vérifiez que le repère rouge situé dans la partie supérieure du tube intérieur, juste en dessous de la plaque de tête, n’est pas visible. Ce point doit également être vérifié régulièrement lors de l’utilisation de la barre. Si le repère rouge apparaît, la barre doit être remontée.
Causes possibles de l’apparition du repère rouge :

- Une structure de plafond trop fragile, ce qui fait que la force exercée par la barre pousse le plafond vers le haut. Utilisez alors l’accessoire pour des plafonds en plâtre. Si cela ne suffit pas, il faut renforcer le plafond ou déplacer la barre vers un endroit où la structure est suffisamment solide.

- La vis de serrage de la fixation rapide s’est desserrée. Serrez l’écrou jusqu’à ce que la fixation rapide soit bien en place.

Avant de réutiliser la barre, vérifiez que toutes les surfaces ne présentent pas de dommages. Cela vaut en particulier pour le joint en caoutchouc de la plaque supérieure et la plaque inférieure, qui génèrent un frottement. Si celui-ci présente des traces de noircissement, il doit être remplacé.

Le bon fonctionnement de la fermeture rapide est vérifié en installant Gripo dans une pièce dotée d’un plafond fixe. Si le repère rouge n’est pas visible après le montage, la barre est stable.

Erreurs d'installation et dépannage

Si la barre semble lâche ou de travers, ou si des traces au plafond ou au sol indiquent qu’elle s’est déplacée, l’installation doit être vérifiée par une personne qualifiée. Si un repère d'avertissement rouge est visible à l'extrémité supérieure du tube intérieur, juste en dessous de la partie inférieure de la plaque de finition supérieure, la barre ne doit pas être utilisée tant que l'installation n'a pas été refaite. Cela peut indiquer que la barre n'est pas correctement installée ou que la structure du plafond n'est pas suffisamment solide et risque de céder.

Inspection régulière

DURÉE DE VIE

La durée de vie prévue du produit est estimée à 5 ans, à condition qu'il soit utilisé correctement et conformément au présent mode d'emploi ainsi qu'aux consignes de sécurité et d'entretien qui y figurent.

GÉNÉRALITÉS

Toutes les surfaces doivent être inspectées régulièrement, et en particulier avant toute réutilisation, afin de détecter d'éventuels dommages. Aucune autre mesure d'entretien n'est nécessaire.

SOLLICITATIONS PARTICULIÈRES DU PRODUIT

S'il s'agit d'un produit standard destiné à un usage normal, celui-ci ne nécessite aucune inspection régulière particulière allant au-delà de ce qui est décrit ci-dessus.

Hepro se tient bien sûr à votre disposition pour vous conseiller et vous aider si vous le souhaitez.

Historique des versions / Modifier / Version

VERSION	4 RD	MODI FIER	2024

Attention ! Le manuel d'utilisation n'est valable qu'à la date d'impression. Des notices d'utilisation mises à jour sont disponibles sur notre site web.

HEPRO

Actif et en toute sécurité
à toutes les étapes de la vie

HEPRO AS | Tømmerveien 10, 8250 Rognan - Norvège
hepro.no |firmapost@hepro.no | (+47) 46 74 55 55