
GRIPO

ISTRUZIONI PER L'USO

ITALIANO

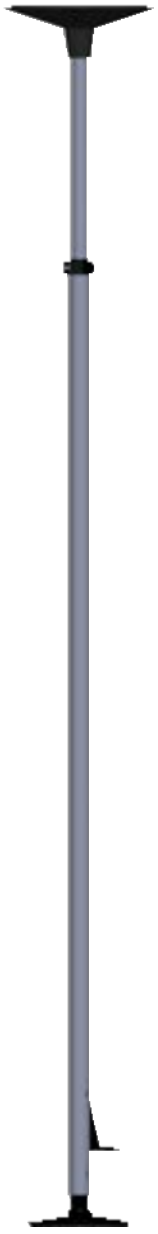

CE

HEPRO

Premessa

Il Gripo è una barra di sostegno verticale che si installa tra il pavimento e il soffitto. Il Gripo aiuta l'utente ad alzarsi, a sedersi e a stare in piedi. L'obiettivo del Gripo è consentire agli utenti di svolgere le loro attività quotidiane in modo autonomo o con maggiore autonomia, in particolare per quanto riguarda l'igiene personale e l'uso del bagno. Il Gripo si adatta a qualsiasi ambiente ed è molto facile da installare. La barra di sostegno funziona perfettamente da sola, ma può anche essere integrata con utili accessori.

La barra di sostegno è stata testata e omologata in conformità alla norma EN 12182:2012, nonché per quanto riguarda la resistenza alla corrosione secondo le norme ISO 9227:2017 e ASTM G154-16. È
è realizzata in alluminio e plastica ed è destinata ad essere fissata tra il pavimento e il soffitto in tutti gli ambienti in cui il soffitto e il pavimento siano sufficientemente solidi da sostenere un carico puntuale di 100 kg.
A ciascuna estremità della barra si trova una piastra terminale a forma di disco con un anello di attrito integrato.
La forza di serraggio di 900 N (pari a circa 100 kg) tra le piastre terminali è mantenuta da una molla a gas.

Ciò significa che la barra può essere installata senza alcuna avvitatura e che il suo smontaggio non lascia alcuna traccia di montaggio sul pavimento o sul soffitto.
Grazie a vari accessori, la barra può essere adattata a numerose situazioni d'uso diverse. Hepro propone 3 modelli diversi adatti al campo di applicazione desiderato. Le barre vengono fornite in colore alluminio naturale, con tubi in alluminio anodizzato e tutte le parti in plastica di colore nero.

Hepro è un'azienda produttrice e può quindi offrire soluzioni su misura, se necessario.

Hepro è un'azienda industriale norvegese che sviluppa, produce e commercializza ausili tecnici destinati agli anziani e alle persone con mobilità ridotta. Fondata nel 1987, l'azienda impiega attualmente circa
85 collaboratori.

La sede centrale e lo stabilimento dell'azienda si trovano a Rognan, nella contea di Nordland.

Hepro AS, Tømmerveien 10, 8250 Rognan.

IMPORTANTE!

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare la barra di sostegno Gripo.

Spiegazione dei simboli

Produttore

Avvertenza

Data di produzione

Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima dell'utilizzo

Numero di serie

Marcatura CE

Dispositivo medico

Contenuto del o del prodotto

ASTA



PIASTRA SUPERIORE / PIASTRA DI BASE






MOLLA A GAS



Sicurezza

Questo prodotto è destinato all'uso domestico in abitazioni private o strutture ricettive.

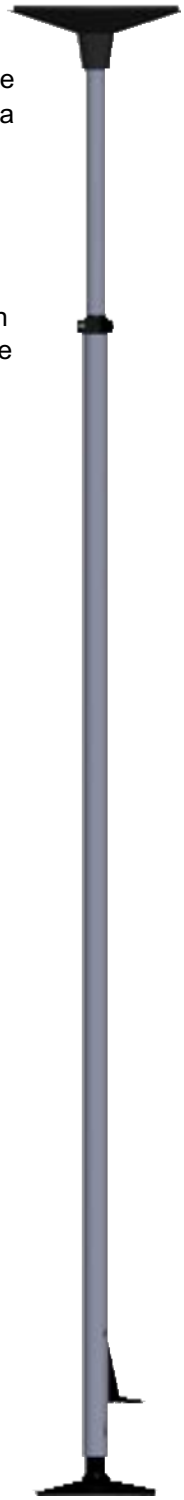

- Non utilizzare il prodotto se è visibile l'anello di sicurezza rosso situato nella parte superiore dell'asta.
- Esiste il rischio di rimanere incastrati tra l'asta e altri mobili o oggetti. Posizionare l'asta a una distanza sufficiente dagli altri mobili o oggetti in modo che l'utente non possa rimanere incastrato tra l'asta e questi ultimi.
- Non installare il prodotto su oggetti non fissati saldamente al pavimento o al soffitto, quali tappeti, piastrelle o altri elementi simili.
- Non lasciare che i bambini giochino con il prodotto.
- Installarlo solo su superfici piane e parallele.
- In caso di installazione in un ambiente umido, è obbligatorio l'uso di un dispositivo antiscivolo; rif. 35007.
- Il prodotto non deve essere modificato o alterato in alcun modo, salvo diversa indicazione contenuta nelle presenti istruzioni per l'uso.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente con gli accessori originali Hepro.
- Gripo può essere installato nella doccia. Tutti i componenti di Gripo sono resistenti alla corrosione e possono rimanere a contatto permanente con liquidi a pH neutro. I liquidi alcalini possono causare, nel lungo periodo, la corrosione dell'alluminio anodizzato e influire negativamente sulla durata del prodotto. Si raccomanda pertanto di sciacquare Gripo con acqua dopo aver utilizzato liquidi alcalini.
- Pulire e disinfettare il prodotto esclusivamente secondo le istruzioni riportate nella sezione «PULIZIA E DISINFEZIONE».

IL KIT GRIPO COMPRENDE:
1 x piastra di base (piastra piccola)
1 x piastra superiore (piastra più grande)
1 x asta
1 x molla a gas
1 x manuale d'uso

VARIANTI

Codice	Articolo	Altezza del soffitto
35200	Gripo	210 - 300 cm
35210 *	Gripo Long	260 - 320 cm
35202	Gripo Speciale	Meno di 210 cm

* Questo modello è dotato di un tubo di prolunga più lungo di 15 cm e consente di fissare gli accessori all'estremità superiore dell'asta.

Istruzioni per l’uso

SVILUPPATO E PRODOTTO SECONDO:

- MDR 2017/745
- EN 12182:2012 16.2
- ISO 9227-2017 e ASTM G154-16

CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo prodotto è destinato all’uso domestico in abitazioni private o strutture ricettive. La barra di sostegno Gripo deve essere a temperatura ambiente prima dell’installazione.

PESO DELL'UTENTE

Peso massimo dell’utente: 210 kg.

VITA UTILE

La durata di vita prevista del prodotto è stimata in 5 anni, a condizione che venga utilizzato correttamente e in conformità con le presenti istruzioni per l’uso, nonché con le norme di sicurezza e manutenzione ivi contenute.

MANUTENZIONE


La durata della molla a gas si prolunga se l’asta viene tesa almeno due volte all’anno. È opportuno verificare regolarmente che tutte le superfici non presentino danni. Non sono necessarie altre misure di manutenzione.

PULIZIA E DISINFEZIONE

Pulire il prodotto con una soluzione saponosa delicata, risciacquarlo con acqua pulita e asciugarlo con un panno assorbente. Per la disinfezione, utilizzare un disinfettante per superfici a base alcolica disponibile in commercio. Istruzioni per l’uso: impregnare completamente il prodotto, precedentemente pulito e risciacquato con acqua, con il disinfettante. Lasciare agire per almeno per 30 secondi. Lasciare asciugare completamente all’aria prima dell’uso. Durante la disinfezione, attenersi alle istruzioni d’uso e alle norme di sicurezza fornite dal produttore del disinfettante.

COME TROVARE IL NUMERO DI SERIE

Il numero di serie si trova nella parte inferiore del tubo esterno in alluminio del prodotto.

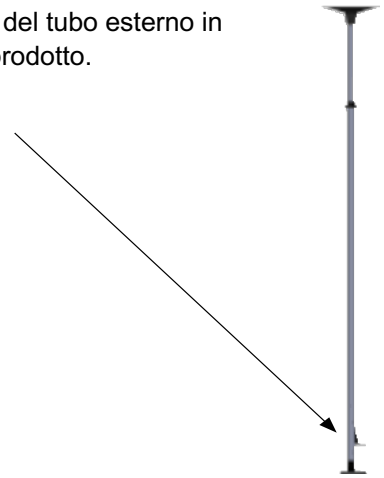

DESTINATARI

Questo prodotto è destinato alle persone che necessitano di assistenza o sostegno per alzarsi, sedersi o stare in piedi nella vita quotidiana.

RICICLAGGIO

Asta e base	Alluminio 6061-T6
Pezzi in plastica nera	PA6
Anelli in gomma morbida	Mermoplastica Elastomero (TPE)
Ricambi	Acciaio inossidabile, rame e alluminio

Tutti i componenti devono essere riciclati in conformità con le normative locali. Si prega di rivolgersi al centro di riciclaggio del proprio comune.

DIMENSIONI

Peso	4,7 kg
Altezza	Vedi tabella, pagina 5
Larghezza della piastra superiore	290 mm

Per quanto riguarda il montaggio

INDICAZIONI MEDICHE

Gripo è una barra di sostegno verticale che si installa tra il pavimento e il soffitto. Gripo aiuta l'utente ad alzarsi, a sedersi e a rimanere in piedi. L'obiettivo di Gripo è consentire agli utenti di svolgere le attività quotidiane in modo autonomo o con maggiore autonomia, in particolare per quanto riguarda l'igiene personale e l'uso del bagno.


GRIPO è indicato in caso di difficoltà nell'utilizzare sedie, letti, lavandini, servizi igienici, vasche da bagno o docce a causa di una capacità limitata di stare in piedi o seduti, oppure in caso di ridotta capacità di sedersi o alzarsi in modo autonomo, o di coricarsi o alzarsi dal letto, a causa di:

- una disfunzione degli arti inferiori dovuta a una mobilità ridotta o totalmente assente delle articolazioni e/o
- una diminuzione della forza muscolare degli arti inferiori e/o
- di una lesione della colonna lombare che comporti un'alterazione della mobilità articolare, con funzionalità sufficiente degli arti superiori e stabilità sufficiente del tronco.

Gripo si integra in qualsiasi ambiente ed è molto facile da installare. La barra d'appoggio funziona perfettamente da sola, ma può anche essere integrata con utili accessori.

CONTROINDICAZIONI

Questo prodotto non è adatto a persone con scarsa forza nelle braccia, a persone con un equilibrio molto precario o affette da gravi disturbi cognitivi. L'uso di questo accessorio comporta un rischio di lesioni in caso di montaggio errato o di utilizzo improprio.
La barra non deve essere installata in modo tale da presentare un rischio di schiacciamento tra un mobile, una parete e la barra stessa.
Gripo non deve inoltre essere montato su una superficie instabile. Il prodotto non deve essere utilizzato senza una formazione preliminare e prima di aver letto e compreso le istruzioni per l'uso.

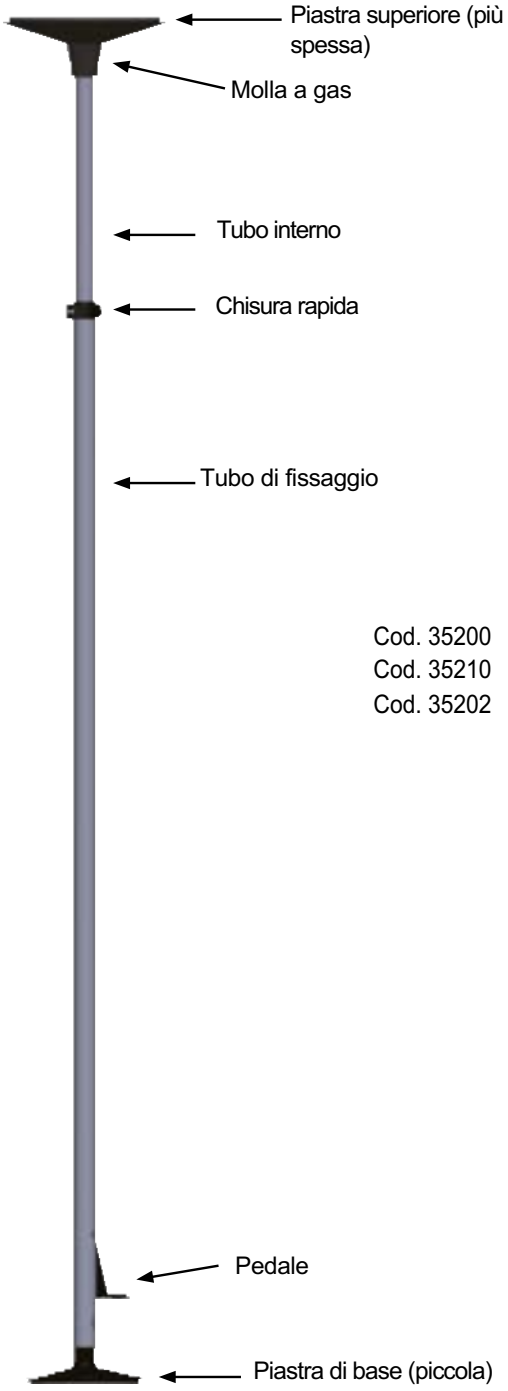


Cod. 35200
Cod. 35210
Cod. 35202

FISSAGGIO DEL GRIPO AL SOFFITTO

Prima di installare il Gripo, è necessario verificare la solidità della struttura del soffitto e assicurarsi che sia possibile posizionare la barra nel punto desiderato. Il soffitto e il pavimento devono essere sufficientemente solidi da sostenere un carico puntuale di 100 kg.

In caso di installazione del Gripo su soffitti in cartongesso o altri soffitti poco resistenti, si raccomanda di utilizzare l'accessorio 35153 – «pannello superiore largo», che garantisce un rinforzo supplementare tra la piastra superiore della barra e il soffitto.

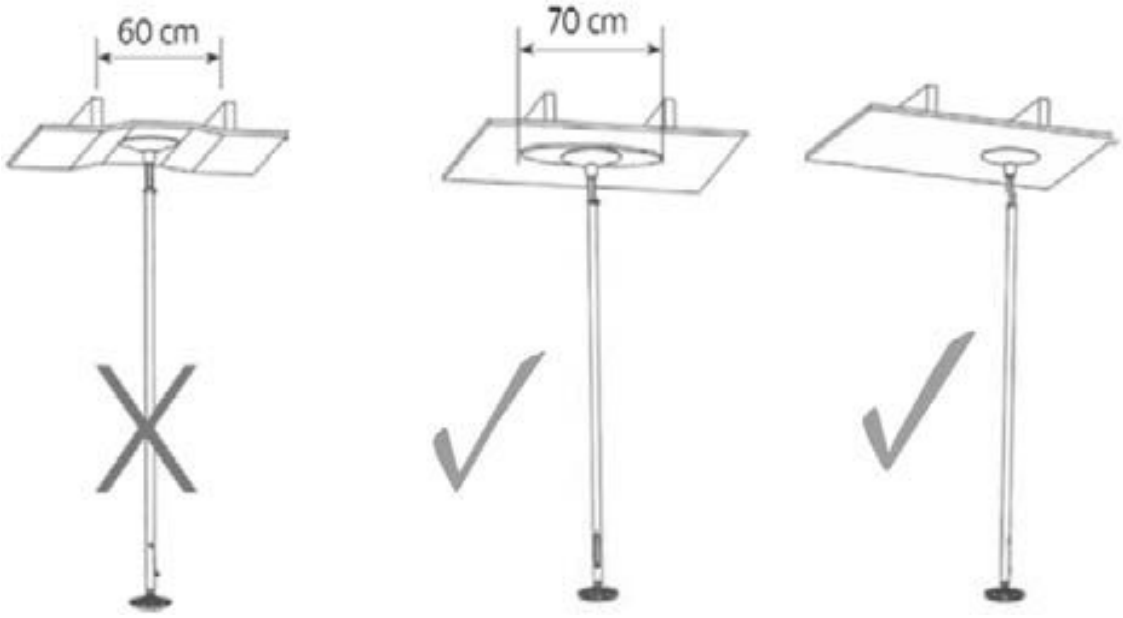


Errato


Utilizzare la piastra superiore « e larga»

Corretto

Tenere sempre presente il rischio di incastro tra la barra di sostegno e i mobili.

Per evitare qualsiasi rischio di incastro tra il letto/la sedia e il Gripo, è possibile montare una maniglia circolare d30 o un accessorio adatto, come indicato nelle illustrazioni.

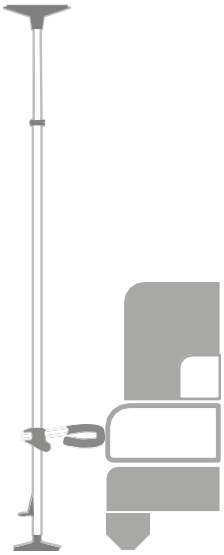

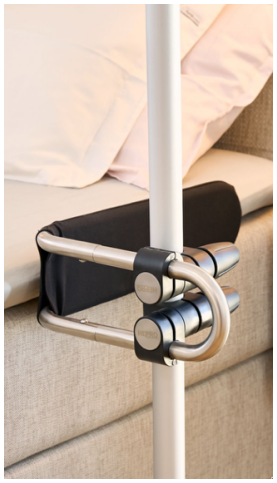

sponda per letto (art. 35328)

Montaggio

1

Prima di iniziare il montaggio:

Posizionare la barra sulla piastrina di base in modo che l’asta si inserisca nella scanalatura.

Inserire la molla a gas sul tubo interno e spingerla fino al segno rosso di avvertenza.

Fissare la piastra superiore sulla parte superiore della molla a gas.

Sul soffitto viene esercitata una forza di 100 kg.



2

Posizionare la barra di supporto nel punto appropriato.

Rimuovere il pedale.



3

Spingere il tubo interno verso l’alto finché la piastra superiore non tocca il soffitto. A quel punto la piastra inferiore toccherà il pavimento.

Assicurarsi che l'asta sia perfettamente verticale.



4

Ruotare il tubo interno in senso orario fino a quando non scatta in posizione nel tubo esterno.



5


Stringere il fissaggio rapido.



6

Premere il pedale verso il basso. Assicurarsi che il soffitto sostenga il carico e non ceda quando si preme delicatamente il pedale.

Verificate che l’indicatore rosso sia scomparso. Se l’indicatore rosso è visibile, smontate l’asta e ricominciate dal punto 2.

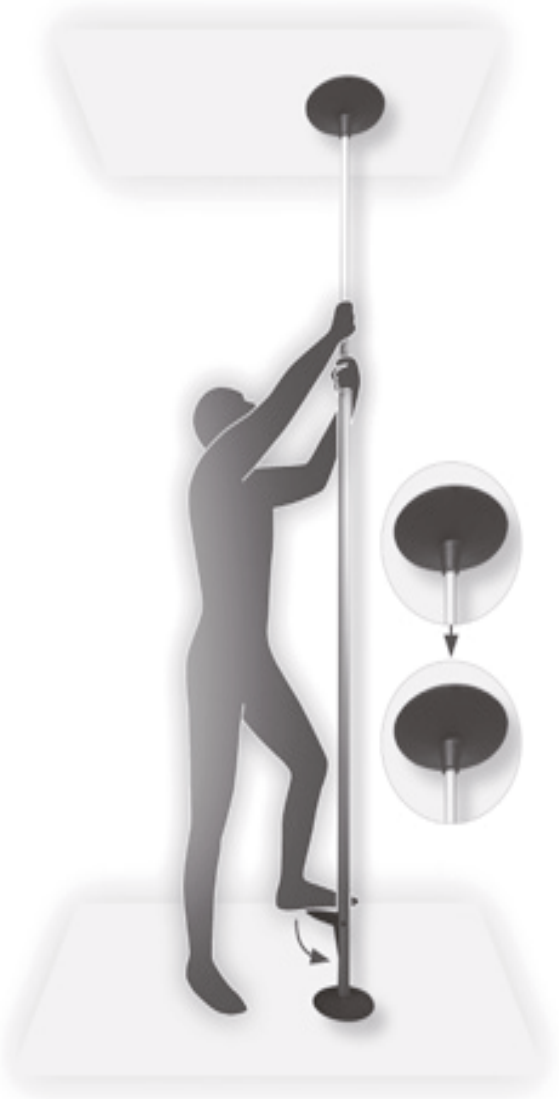

Assicurarsi che l’indicatore rosso non sia visibile durante l’uso. Se dovesse comparire, smontare l’asta e rimontarla. Verificare che la vite di serraggio del raccordo rapido non sia allentata e che il tubo interno sia avvitato correttamente. Se l’indicatore rosso è ancora visibile, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la struttura del soffitto non è sufficientemente solida.

Smontaggio

Aprire il raccordo rapido e sollevare il pedale. Se necessario, ruotare il tubo interno in senso antiorario.

Controllo del funzionamento del prodotto e degli accessori

Una volta completato il montaggio, verificare che l'indicatore rosso situato nella parte superiore del tubo interno, proprio sotto la piastra di testa, non sia visibile. Questo punto deve essere controllato regolarmente anche durante l'utilizzo della barra. Se l'indicatore rosso è visibile, la barra deve essere rimontata.
Possibili cause della comparsa del segno rosso:

– Una struttura del soffitto troppo fragile, per cui la forza esercitata dalla barra spinge il soffitto verso l'alto. In tal caso, utilizzare l'accessorio per soffitti in gesso. Se ciò non bastasse, è necessario rinforzare il soffitto o spostare la barra in un punto in cui la struttura sia sufficientemente solida.

– La vite di serraggio del fissaggio rapido si è allentata. Serrare il dado fino a quando il fissaggio rapido non è ben saldo.

Prima di riutilizzare la barra, verificare che tutte le superfici non presentino danni. Ciò vale in particolare per la guarnizione in gomma della piastra superiore e della piastra inferiore, che generano attrito. Se questa presenta tracce di annerimento, deve essere sostituita.

Il corretto funzionamento della chiusura rapida viene verificato installando Gripo in un locale dotato di soffitto fisso. Se dopo il montaggio l'indicatore rosso non è visibile, la barra è stabile.

Errori di installazione e di risoluzione dei problemi

Se la barra sembra allentata o storta, oppure se sul soffitto o sul pavimento sono visibili segni che indicano che si è spostata, l'installazione deve essere verificata da una persona qualificata. Se è visibile un indicatore di avvertimento rosso all'estremità superiore del tubo interno, proprio sotto la parte inferiore della piastra di finitura superiore, la barra non deve essere utilizzata finché l'installazione non è stata rifatta. Ciò può indicare che la barra non è installata correttamente o che la struttura del soffitto non è sufficientemente solida e rischia di cedere.

Ispezione periodica

DURATA DI VITA

La durata prevista del prodotto è stimata in 5 anni, a condizione che venga utilizzato correttamente e in conformità con le presenti istruzioni per l'uso, nonché con le norme di sicurezza e manutenzione ivi contenute.

INFORMAZIONI GENERALI

Tutte le superfici devono essere ispezionate regolarmente, in particolare prima di ogni riutilizzo, al fine di individuare eventuali danni. Non sono necessarie altre misure di manutenzione.

SOLLECITAZIONI PARTICOLARI DEL PRODOTTO

Trattandosi di un prodotto standard destinato a un uso normale, non richiede alcuna ispezione periodica specifica oltre a quanto sopra descritto.

Hepro è naturalmente a vostra disposizione per fornirvi consulenza e assistenza, qualora lo desideriate.

Cronologia delle versioni / Modifica / Versione

VERSIONE	4 RD	MODIFICA	2024

Attenzione! Il manuale d'uso è valido solo alla data di stampa. Sul nostro sito web sono disponibili manuali d'uso aggiornati.

HEPRO

Attivi e in tutta sicurezza
in ogni fase della vita

HEPRO AS | Tømmerveien 10, 8250 Rognan - Norvegia
hepro.no |firmapost@hepro.no | (+47) 46 74 55 55