

Riferimento - descrizione	GTIN
<input type="checkbox"/> 20014 : Imbragatura standard tessuto a rete Tessuto a rete 100% Poliestere – cinghie 100% Polipropilene – (taglie 1900x900) – Carico massimo : 200 kg	 361580005055
<input type="checkbox"/> 20015 C : Imbragatura standard Tessuto 100% Poliestere – cinghie 100% Polipropilene – (taglie 1700x820) - Carico massimo: 200 kg	 361580005154
<input type="checkbox"/> 20016 : Imbragatura standard tessuto a rete con poggiatesta Tessuto a rete 100% Poliestere – cinghie 100% Polipropilene – (taglie 1900x900) - Carico massimo: 200 kg	 361580005062
<input type="checkbox"/> 20017 : Imbragatura XL con poggiatesta Tessuto 100% Poliestere – cinghie 100% Polipropilene – (taglie 2350x1200) - Carico massimo: 330 kg	 361580005079
<input type="checkbox"/> 20018 : Imbragatura standard tessuto a rete XL con poggiatesta Tessuto a rete 100% Poliestere – cinghie 100% Polipropilene – (taglie 2350x1200) - Carico massimo: 330 kg	 3615800041060
<input type="checkbox"/> 20020 : Imbragatura per bambino Tessuto 100% Poliestere – cinghie 100% Polipropilene – (taglie 1500x700) - Carico massimo: 150 kg	 361580005086
<input type="checkbox"/> 20021 : Imbragatura per bambino con poggiatesta Tessuto 100% Poliestere – cinghie 100% Polipropilene – (taglie 1800x700) - Carico massimo: 150 kg	 361580005093
<input type="checkbox"/> 20022 : Imbragatura U tessuto a rete per bambino con poggiatesta Tessuto a rete 100% Poliestere – cinghie 100% Polipropilene – (taglie 1800x700) - Carico massimo: 150 kg	 3615800041077
<input type="checkbox"/> 20041 : Imbragatura L con poggiatesta Tessuto 100% Poliestere – cinghie 100% Polipropilene – (taglie 2250x900) - Carico massimo: 330 kg	 361580005109
<input type="checkbox"/> 20042 : Imbragatura vinile Rivestimento in PVC su poliestere – cinghie 100% Polipropilene – (taglie 1500x840) - Carico massimo: 200 kg	 361580005116
<input type="checkbox"/> 20043 : Imbragatura vinile con poggiatesta Rivestimento in PVC su poliestere – cinghie 100% Polipropilene – (taglie 1900x840) - Carico massimo: 200 kg	 361580005130
<input type="checkbox"/> 20044 : Imbragatura avvolgente con poggiatesta Tessuto 100% Poliestere – cinghie 100% Polipropilene – (taglie 1900x1100) - Carico massimo: 200 kg	 361580005123

Edition 06/2024-IT

www.hms-vilgo.com

Siège social : Parc Eurasanté – 243 Rue Allendé – 59120 LOOS LEZ LILLE
Tél : +33 (0)3 20 84 81 50 – Fax : + 33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte Alvère – Creysse – BP 212 – 24102 BERGERAC Cedex
Tel. : +33 (0)5 53 74 45 50 – Fax : +33 (0)5 53 63 06 07

Riferimento - descrizione	GTIN
<input type="checkbox"/> 20014 : Imbragatura standard tessuto a rete Tessuto a rete 100% Poliestere – cinghie 100% Polipropilene – (taglie 1900x900) – Carico massimo: 200 kg	 361580005055
<input type="checkbox"/> 20015 C : Imbragatura standard Tessuto 100% Poliestere – cinghie 100% Polipropilene – (taglie 1700x820) - Carico massimo: 200 kg	 361580005154
<input type="checkbox"/> 20016 : Imbragatura standard tessuto a rete con poggiatesta Tessuto a rete 100% Poliestere – cinghie 100% Polipropilene – (taglie 1900x900) - Carico massimo: 200 kg	 361580005062
<input type="checkbox"/> 20017 : Imbragatura XL con poggiatesta Tessuto 100% Poliestere – cinghie 100% Polipropilene – (taglie 2350x1200) - Carico massimo: 330 kg	 361580005079
<input type="checkbox"/> 20018 : Imbragatura standard tessuto a rete XL con poggiatesta Tessuto a rete 100% Poliestere – cinghie 100% Polipropilene – (taglie 2350x1200) - Carico massimo: 330 kg	 3615800041060
<input type="checkbox"/> 20020 : Imbragatura per bambino Tessuto 100% Poliestere – cinghie 100% Polipropilene – (taglie 1500x700) - Carico massimo: 150 kg	 361580005086
<input type="checkbox"/> 20021 : Imbragatura per bambino con poggiatesta Tessuto 100% Poliestere – cinghie 100% Polipropilene – (taglie 1800x700) - Carico massimo: 150 kg	 361580005093
<input type="checkbox"/> 20022 : Imbragatura U tessuto a rete per bambino con poggiatesta Tessuto a rete 100% Poliestere – cinghie 100% Polipropilene – (taglie 1800x700) - Carico massimo: 150 kg	 3615800041077
<input type="checkbox"/> 20041 : Imbragatura L con poggiatesta Tessuto 100% Poliestere – cinghie 100% Polipropilene – (taglie 2250x900) - Carico massimo: 330 kg	 361580005109
<input type="checkbox"/> 20042 : Imbragatura vinile Rivestimento in PVC su poliestere – cinghie 100% Polipropilene – (taglie 1500x840) - Carico massimo: 200 kg	 361580005116
<input type="checkbox"/> 20043 : Imbragatura vinile con poggiatesta Rivestimento in PVC su poliestere – cinghie 100% Polipropilene – (taglie 1900x840) - Carico massimo: 200 kg	 361580005130
<input type="checkbox"/> 20044 : Imbragatura avvolgente con poggiatesta Tessuto 100% Poliestere – cinghie 100% Polipropilene – (taglie 1900x1100) - Carico massimo: 200 kg	 361580005123

Edition 06/2024-IT


www.hms-vilgo.com

Siège social : Parc Eurasanté – 243 Rue Allendé – 59120 LOOS LEZ LILLE
Tél : +33 (0)3 20 84 81 50 – Fax : + 33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte Alvère – Creysse – BP 212 – 24102 BERGERAC Cedex
Tel. : +33 (0)5 53 74 45 50 – Fax : +33 (0)5 53 63 06 07

Installazione dell'imbragatura:

Avvertenza: l'imbragatura è dotata di diverse posizioni di regolazione. E' compito dell'utilizzatore dell'apparecchio assicurarsi della corretta regolazione dei diversi elementi al fine di non ferire o far perdere l'equilibrio al paziente.

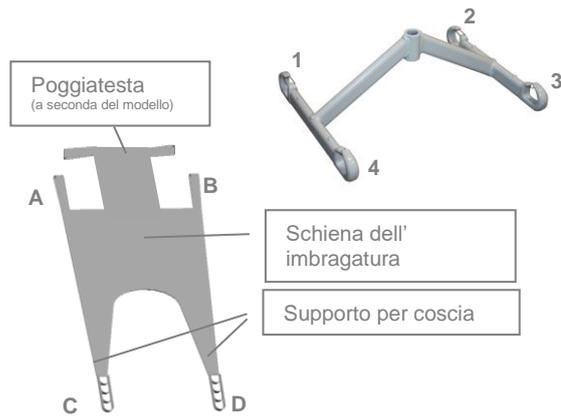

- 1/ Posizionare lo schienale dell'imbragatura (parte larga dell'imbragatura) al livello della schiena della persona da sollevare in modo da posizionare le due cinghie di aggancio A e B da una parte e dall'altra della persona.
 - 2/ Fissare ognuna delle due cinghie di aggancio all'asta del sollevatore (A1 e B2-Cinghia A su gancio 1 e cinghia B su gancio 2).
 - 3/ Far passare il supporto per la coscia destra sollevando leggermente la gamba destra della persona.
 - 4/ Far passare il supporto per la coscia sinistra sollevando leggermente la gamba sinistra della persona.
 - 5/ Incrociare le due cinghie di supporto per le cosce.
 - 6/ Agganciare ognuna delle cinghie C e D ai ganci dell'asta (C3 e D4).
- Nota : Quando si utilizza una imbragatura con poggiatesta, posizionare le cinghie del poggiatesta sui ganci 1 e 2 (con le cinghie A e B precedentemente agganciate).

→ I diversi punti di aggancio permettono di regolare l'inclinazione della persona trasferita. Assicurarsi di agganciare sempre le cinghie A e B allo stesso livello di regolazione (stesso colore). Allo stesso modo, agganciare allo stesso livello di regolazione le cinghie C e D.



Attenzione: le cinghie devono essere posizionate correttamente sui ganci della trave, con le clip di sicurezza chiuse (A). Non posizionare mai le cinghie attorno al gancio o alla clip di sicurezza (B, C, D).

Precauzioni d'uso:


- Quest'imbragatura è stata concepita per essere utilizzata con i sollevatori di marca HMS-VILGO.
- Respetter Rispettare lo stesso livello di aggancio delle cinghie dal lato destro e dal lato sinistro (codice colore).
- Ne Non modificare mai la regolazione del livello di aggancio dell'imbragatura quando il ciclo di sollevamento è in corso.
- Assicurarsi sempre che l'imbragatura sia ben agganciata sull'asta prima di sollevare la persona.
- Non superare mai il carico massimo di utilizzo.
- Utilizzare sempre imbragature la cui compatibilità sia stata verificata da HMS-VILGO (imbragature referenziate in catalogo).
- Non mettere a diretto contatto con la pelle lesa.
- Assicurarsi sempre che la dimensione, il tipo e la forma della cinghia utilizzata siano adatti alla corporatura del paziente.

Précautions de nettoyage :

- Lavabile in lavatrice a 40°
- Niente sbiancamento
- Nessuna asciugatura in lavatrice
- Non stirare
- Non lavare a secco


Installazione dell'imbragatura:

Avvertenza: l'imbragatura è dotata di diverse posizioni di regolazione. E' compito dell'utilizzatore dell'apparecchio assicurarsi della corretta regolazione dei diversi elementi al fine di non ferire o far perdere l'equilibrio al paziente.

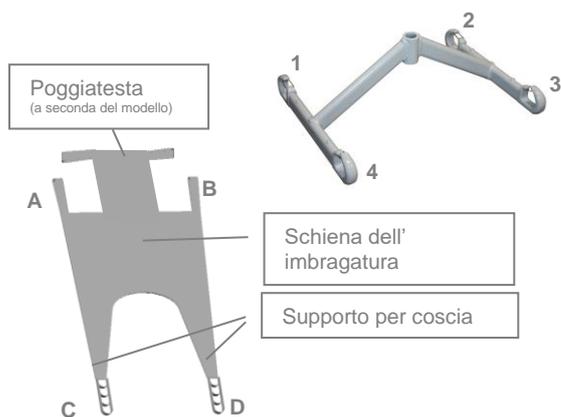

- 1/ Posizionare lo schienale dell'imbragatura (parte larga dell'imbragatura) al livello della schiena della persona da sollevare in modo da posizionare le due cinghie di aggancio A e B da una parte e dall'altra della persona.
 - 2/ Fissare ognuna delle due cinghie di aggancio all'asta del sollevatore (A1 e B2-Cinghia A su gancio 1 e cinghia B su gancio 2).
 - 3/ Far passare il supporto per la coscia destra sollevando leggermente la gamba destra della persona.
 - 4/ Far passare il supporto per la coscia sinistra sollevando leggermente la gamba sinistra della persona.
 - 5/ Incrociare le due cinghie di supporto per le cosce.
 - 6/ Agganciare ognuna delle cinghie C e D ai ganci dell'asta (C3 e D4).
- Nota : Quando si utilizza una imbragatura con poggiatesta, posizionare le cinghie del poggiatesta sui ganci 1 e 2 (con le cinghie A e B precedentemente agganciate).

→ I diversi punti di aggancio permettono di regolare l'inclinazione della persona trasferita. Assicurarsi di agganciare sempre le cinghie A e B allo stesso livello di regolazione (stesso colore). Allo stesso modo, agganciare allo stesso livello di regolazione le cinghie C e D.

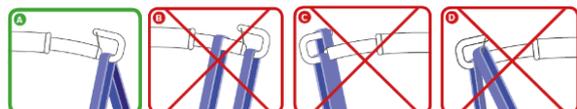

Attenzione: le cinghie devono essere posizionate correttamente sui ganci della trave, con le clip di sicurezza chiuse (A). Non posizionare mai le cinghie attorno al gancio o alla clip di sicurezza (B, C, D).

Precauzioni d'uso:

- Quest'imbragatura è stata concepita per essere utilizzata con i sollevatori di marca HMS-VILGO.
- Respetter Rispettare lo stesso livello di aggancio delle cinghie dal lato destro e dal lato sinistro (codice colore).
- Ne Non modificare mai la regolazione del livello di aggancio dell'imbragatura quando il ciclo di sollevamento è in corso.
- Assicurarsi sempre che l'imbragatura sia ben agganciata sull'asta prima di sollevare la persona.
- Non superare mai il carico massimo di utilizzo.
- Utilizzare sempre imbragature la cui compatibilità sia stata verificata da HMS-VILGO (imbragature referenziate in catalogo).
- Non mettere a diretto contatto con la pelle lesa.
- Assicurarsi sempre che la dimensione, il tipo e la forma della cinghia utilizzata siano adatti alla corporatura del paziente.

Précautions de nettoyage :

- Lavabile in lavatrice a 40°
- Niente sbiancamento
- Nessuna asciugatura in lavatrice
- Non stirare
- Non lavare a secco