



6259220

Code identification individuelle LPPR
SOULEVE-MALADE, ACHAT DES SANGLES, VILGO



| Référence - descriptif | Code GTIN |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 20014 : sangle en U filet Filet 100% Polyester – sangle 100% Polypropylène – (taille 1900x900) – Poids maxi : 200 kg |  3615800005055 |
| <input type="checkbox"/> 20015 C : sangle en U standard Tissu 100% Polyester – sangle 100% Polypropylène – (taille 1700x820) - Poids maxi : 200 kg |  3615800005154 |
| <input type="checkbox"/> 20016 : sangle en U filet avec têtière Filet 100% Polyester – sangle 100% Polypropylène – (taille 1900x900) - Poids maxi : 200 kg |  3615800005062 |
| <input type="checkbox"/> 20017 : sangle en U taille XL avec têtière Tissu 100% Polyester – sangle 100% Polypropylène – (taille 2350x1200) - Poids maxi : 330 kg |  3615800005079 |
| <input type="checkbox"/> 20018 : sangle en U filet taille XL avec têtière Filet 100% Polyester – sangle 100% Polypropylène – (taille 2350x1200) - Poids maxi : 330 kg |  3615800041060 |
| <input type="checkbox"/> 20020 : sangle en U enfant standard Tissu 100% Polyester – sangle 100% Polypropylène – (taille 1500x700) - Poids maxi : 150 kg |  3615800005086 |
| <input type="checkbox"/> 20021 : sangle en U enfant avec têtière Tissu 100% Polyester – sangle 100% Polypropylène – (taille 1800x700) - Poids maxi : 150 kg |  3615800005093 |
| <input type="checkbox"/> 20022 : sangle en U filet enfant avec têtière Filet 100% Polyester – sangle 100% Polypropylène – (taille 1800x700) - Poids maxi : 150 kg |  3615800041077 |
| <input type="checkbox"/> 20041 : sangle en U taille L avec têtière Tissu 100% Polyester – sangle 100% Polypropylène – (taille 2250x900) - Poids maxi : 330 kg |  3615800005109 |
| <input type="checkbox"/> 20042 : sangle en U vinyl Enduction PVC sur Polyester – sangle 100% Polypropylène – (taille 1500x840) - Poids maxi : 200 kg |  3615800005116 |
| <input type="checkbox"/> 20043 : sangle en U vinyl avec têtière Enduction PVC sur Polyester – sangle 100% Polypropylène – (taille 1900x840) - Poids maxi : 200 kg |  3615800005130 |
| <input type="checkbox"/> 20044 : sangle en U enveloppante avec têtière Tissu 100% Polyester – sangle 100% Polypropylène – (taille 1900x1100) - Poids maxi : 200 kg |  3615800005123 |

Edition juin 2024

www.hms-vilgo.com

Siège social : Parc Eurasanté – 243 Rue Allendé – 59120 LOOS LEZ LILLE
Tél : +33 (0)3 20 84 81 50 – Fax : + 33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte Alvère – Creysse – BP 212 – 24102 BERGERAC Cedex
Tel. : +33 (0)5 53 74 45 50 – Fax : +33 (0)5 53 63 06 07



6259220

Code identification individuelle LPPR
SOULEVE-MALADE, ACHAT DES SANGLES, VILGO



| Référence - descriptif | Code GTIN |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 20014 : sangle en U filet Filet 100% Polyester – sangle 100% Polypropylène – (taille 1900x900) – Poids maxi : 200 kg |  3615800005055 |
| <input type="checkbox"/> 20015 C : sangle en U standard Tissu 100% Polyester – sangle 100% Polypropylène – (taille 1700x820) - Poids maxi : 200 kg |  3615800005154 |
| <input type="checkbox"/> 20016 : sangle en U filet avec têtière Filet 100% Polyester – sangle 100% Polypropylène – (taille 1900x900) - Poids maxi : 200 kg |  3615800005062 |
| <input type="checkbox"/> 20017 : sangle en U taille XL avec têtière Tissu 100% Polyester – sangle 100% Polypropylène – (taille 2350x1200) - Poids maxi : 330 kg |  3615800005079 |
| <input type="checkbox"/> 20018 : sangle en U filet taille XL avec têtière Filet 100% Polyester – sangle 100% Polypropylène – (taille 2350x1200) - Poids maxi : 330 kg |  3615800041060 |
| <input type="checkbox"/> 20020 : sangle en U enfant standard Tissu 100% Polyester – sangle 100% Polypropylène – (taille 1500x700) - Poids maxi : 150 kg |  3615800005086 |
| <input type="checkbox"/> 20021 : sangle en U enfant avec têtière Tissu 100% Polyester – sangle 100% Polypropylène – (taille 1800x700) - Poids maxi : 150 kg |  3615800005093 |
| <input type="checkbox"/> 20022 : sangle en U filet enfant avec têtière Filet 100% Polyester – sangle 100% Polypropylène – (taille 1800x700) - Poids maxi : 150 kg |  3615800041077 |
| <input type="checkbox"/> 20041 : sangle en U taille L avec têtière Tissu 100% Polyester – sangle 100% Polypropylène – (taille 2250x900) - Poids maxi : 330 kg |  3615800005109 |
| <input type="checkbox"/> 20042 : sangle en U vinyl Enduction PVC sur Polyester – sangle 100% Polypropylène – (taille 1500x840) - Poids maxi : 200 kg |  3615800005116 |
| <input type="checkbox"/> 20043 : sangle en U vinyl avec têtière Enduction PVC sur Polyester – sangle 100% Polypropylène – (taille 1900x840) - Poids maxi : 200 kg |  3615800005130 |
| <input type="checkbox"/> 20044 : sangle en U enveloppante avec têtière Tissu 100% Polyester – sangle 100% Polypropylène – (taille 1900x1100) - Poids maxi : 200 kg |  3615800005123 |

Edition juin 2024


www.hms-vilgo.com

Siège social : Parc Eurasanté – 243 Rue Allendé – 59120 LOOS LEZ LILLE
Tél : +33 (0)3 20 84 81 50 – Fax : + 33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte Alvère – Creysse – BP 212 – 24102 BERGERAC Cedex
Tel. : +33 (0)5 53 74 45 50 – Fax : +33 (0)5 53 63 06 07

Installation de la sangle :

Rappel : Votre sangle possède plusieurs positions de réglages. Il est sous la responsabilité de l'utilisateur de l'appareil de veiller au réglage adéquat des différents éléments afin de ne pas blesser ou déséquilibrer le patient.

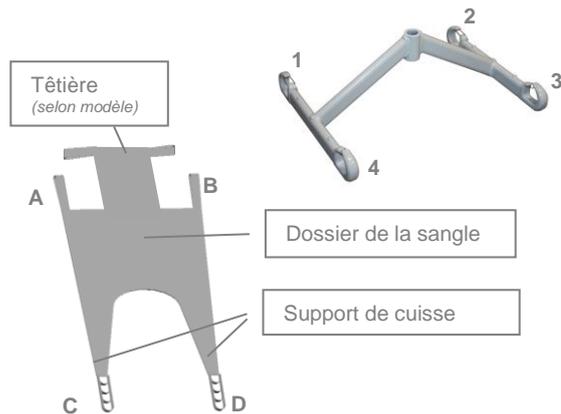

1/ Positionner le dossier de la sangle (partie large de la sangle) au niveau du dos de la personne à soulever de manière à avoir les 2 sangles d'accrochage A et B de part et d'autre de la personne.

2/ Accrocher chacune des sangles d'accrochage au fléau du soulève personne (A1 et B2- Sangle A sur crochet 1 et sangle B sur crochet 2).

3/ Faire passer le support de cuisse droit en soulevant légèrement la jambe droite de la personne.

4/ Faire passer le support de cuisse gauche en soulevant légèrement la jambe gauche de la personne.

5/ Croiser les 2 sangles support de cuisse.

6/ Accrocher chacune des sangles C et D aux crochets du fléau (C3 et D4).

Nb : Lorsqu'il s'agit d'une sangle avec têteière, positionner les sangles de la têteière aux crochets 1 et 2 (avec les sangles A et B préalablement accrochées).

→ Les différents points d'accrochage permettent de régler l'inclinaison de la personne transférée.

Veiller à toujours accrocher les sangles A et B au même niveau de réglage (couleur identique).

De la même manière, accrocher au même niveau de réglage les sangles C et D.



Attention : les sangles doivent être correctement positionnées sur les crochets du fléau, clips de sécurité refermés (A).

Ne jamais positionner les sangles autour du crochet ou du clip de sécurité (B,C,D)

Précautions d'utilisation :


- Cette sangle a été conçue pour être utilisée avec les soulève malades de marque HMS-VILGO.
- Respecter le même réglage d'accrochage des sangles côté droit et gauche (code couleur).
- Ne jamais modifier le réglage de niveau d'accrochage des sangles lorsque le cycle de levage est en cours.
- Toujours s'assurer que la sangle est bien crochetée sur le fléau avant de soulever la personne.
- Ne jamais dépasser la charge maximale d'utilisation indiquée sur la sangle.
- Toujours utiliser des sangles dont la compatibilité a été vérifiée par HMS-VILGO (sangles référencées au catalogue).
- Ne pas mettre directement en contact d'une peau présentant des lésions.
- Toujours s'assurer que la taille, le type et la forme de la sangle utilisée soient en rapport avec la corpulence du patient.

Précautions de nettoyage :

- Lavable en machine à 40°C
- Blanchiment à proscrire
- Pas de séchage en machine
- Ne pas repasser
- Pas de nettoyage à sec

Installation de la sangle :

Rappel : Votre sangle possède plusieurs positions de réglages. Il est sous la responsabilité de l'utilisateur de l'appareil de veiller au réglage adéquat des différents éléments afin de ne pas blesser ou déséquilibrer le patient.

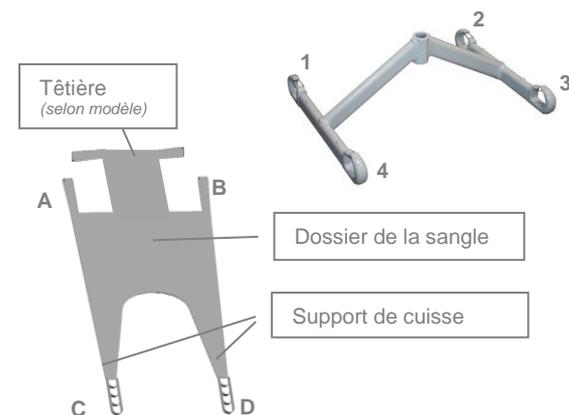

1/ Positionner le dossier de la sangle (partie large de la sangle) au niveau du dos de la personne à soulever de manière à avoir les 2 sangles d'accrochage A et B de part et d'autre de la personne.

2/ Accrocher chacune des sangles d'accrochage au fléau du soulève personne (A1 et B2- Sangle A sur crochet 1 et sangle B sur crochet 2).

3/ Faire passer le support de cuisse droit en soulevant légèrement la jambe droite de la personne.

4/ Faire passer le support de cuisse gauche en soulevant légèrement la jambe gauche de la personne.

5/ Croiser les 2 sangles support de cuisse.

6/ Accrocher chacune des sangles C et D aux crochets du fléau (C3 et D4).

Nb : Lorsqu'il s'agit d'une sangle avec têteière, positionner les sangles de la têteière aux crochets 1 et 2 (avec les sangles A et B préalablement accrochées).

→ Les différents points d'accrochage permettent de régler l'inclinaison de la personne transférée.

Veiller à toujours accrocher les sangles A et B au même niveau de réglage (couleur identique).

De la même manière, accrocher au même niveau de réglage les sangles C et D.



Attention : les sangles doivent être correctement positionnées sur les crochets du fléau, clips de sécurité refermés (A).

Ne jamais positionner les sangles autour du crochet ou du clip de sécurité (B,C,D)

Précautions d'utilisation :

- Cette sangle a été conçue pour être utilisée avec les soulève malades de marque HMS-VILGO.
- Respecter le même réglage d'accrochage des sangles côté droit et gauche (code couleur).
- Ne jamais modifier le réglage de niveau d'accrochage des sangles lorsque le cycle de levage est en cours.
- Toujours s'assurer que la sangle est bien crochetée sur le fléau avant de soulever la personne.
- Ne jamais dépasser la charge maximale d'utilisation indiquée sur la sangle.
- Toujours utiliser des sangles dont la compatibilité a été vérifiée par HMS-VILGO (sangles référencées au catalogue).
- Ne pas mettre directement en contact d'une peau présentant des lésions.
- Toujours s'assurer que la taille, le type et la forme de la sangle utilisée soient en rapport avec la corpulence du patient.

Précautions de nettoyage :

- Lavable en machine à 40°C
- Blanchiment à proscrire
- Pas de séchage en machine
- Ne pas repasser
- Pas de nettoyage à sec